
 / cloudcuddlers
www.cloudcuddle.com

Brugsanvisning til CloudCuddle Junior

I. INTRODUKTION	1
A. Generelt	1
B. Sikkerhedsadvarsel	1
C. Egenskaber	2
D. Anvendelse	2
II. SPECIFIKATIONER	3
A. CloudCuddle-dele	3
1. Overtræk (rørovertræk-net-madrasovertræk)	3
2. Oppustelig ramme (er anbragt i rørovertrækket)	3
B. Tekniske specifikationer	4
C. Mærkning	4
III. INSTRUKTIONER TIL PUMPE	5
A. Pumpetype	5
B. Pumpedele	5
C. Anvendelse	5
IV. OPSÆTNING OG NEDTAGNING AF CLOUDCUDDLE	6
A. Opsætning af CloudCuddle	6
B. Nedtagning af CloudCuddle	6
C. Vedligeholdelse, sammenrulning og opbevaring	7
V. VASKEANVISNINGER FOR OVERTRÆK/LAGEN SAMT GENANVENDELSE 8	8
A. Generelt	8
B. Termisk desinfektion	8
C. Vask af lagen	8
D. Vask af hele CloudCuddle-overtrækket	9
E. Anbringelse af ramme i overtræk	9
F. Retningslinjer for genanvendelse	9
VI. TIPS OG RÅD	10
VII. FEJLFINDING	10

A. Generelt	
CloudCuddle Junior er et oppusteligt sengetelt, der forhindrer, at personer falder eller uønsket kravler ud af sengen. Det forvandler hurtigt en standard 1-personsseng med madras til et sikkert sted at sove. Forældre og plejepersonale bruger CloudCuddle Junior til forskellige formål:	
<ul style="list-style-type: none"> • I hjemmet; • Overnatning hos familie og venner; • Ferie; • Aflastningspleje; • Ekstra soveplads i indkvarteringshus eller institution; • Hospitalsindlæggelse 	
CloudCuddle sørger for sikkerhed og tryghed. Det gennemsigtige net sikrer kommunikation ansigt-til-ansigt. CloudCuddle kan modstå voldsomme kræfter, absorberer stød og dæmper både stødpåvirkning og støj.	
B. Sikkerhedsadvarsel	
 <ul style="list-style-type: none"> • Læs brugsanvisningen grundigt inden første brug. • Opsæt CloudCuddle i god tid (mindst 3 timer) inden hver brug. • Rammens hårdhed: CloudCuddle skal altid være hårdt oppustet. Dette skal kontrolleres inden hver brug. Brug pumpen, der følger med CloudCuddle, og lav 30-35 hele pumpebevægelser (op og ned). Derefter kan du ikke tilføre mere luft, og har nået det sikre, ønskede tryk på 0,45 bar. Brug aldrig en elektrisk pumpe. • Sengeheste og sengerammer: Placer aldrig CloudCuddle i en sengeramme, klemt inde mellem sengeheste eller mod muren. Produktet skal have fuld plads til sine ydre mål, som er 200 (l) x 110 (b) x 105 (h). Hvis CloudCuddle klemmes, opstår der for stort et tryk på sømmene i den oppustelige ramme. Det kan forårsage, at sømmene slides, hvilket kan få rammen til at revne og slippe luft under tryk ud. • Sengeramme: Lamelbunden må aldrig være mere end 50 cm over jorden. Ved brug sammen med en plejeseng, skal sengebunden derfor sænkes, efter at plejen er udført. Sengen skal veje mindst 20 kg. Det forhindrer rammen inklusive CloudCuddle i at tippe, når nogen lægger deres fulde vægt mod den. Er sengen let? Så skal madrassen anbringes på gulvet. • Rørklemmer på rammens ryg: Disse skal altid være lukkede. De må kun åbnes, når rammen skal tømmes for luft eller fyldes med ekstra luft. • Lagen med lynlås: Brug altid CloudCuddle med lagnet fastgjort med lynlås. Uden dette lagen kan man krybe ind mellem madrasovertrækket og sengeramme. • Kæledyr: Hold kæledyr væk fra CloudCuddle for at undgå skader. • Skarpe objekter og ild: Placer ikke CloudCuddle tæt på hårde eller skarpe objekter eller 	

i nærheden af åben ild. Hold skarpe genstande eller legetøj med skarpe kanter væk fra CloudCuddle.

- **Kontrol af overtræk:** Kontroller altid overtrækkets dele for defekter, og lad det om nødvendigt repareres af os i tide.
- **Omgivelsestemperatur for CloudCuddle-ramme:** CloudCuddle-rammen må aldrig udsættes for temperaturer over 50 °C. Denne risiko er især til stede, når CloudCuddle befinder sig i en bil i solen.
- **Madras mål:** CloudCuddle er designet til madrasser i størrelsen 200 cm x 90 cm x 16- 26cm. Brug aldrig andre madrasstørrelser.
- **Udvendige mål (200 cm x 110 cm x 105 cm):** CloudCuddle skal stå frit på sengen og må ikke klemmes fast mellem sengeheste eller hindres i højden af f.eks. et lavt loft.
- **Luftmadras:** Brug ikke CloudCuddle sammen med en luftmadras.
- **Spændeanordninger:** Luk alle spændeanordninger på spændestroppe. Både på spændestroppe under madrassen såvel som spændestroppe på sengerammen.
- **Spændestroppe på sengeramme:** Spændestroppe, der fastgør CloudCuddle til sengerammen, skal være stramt spændte, så de ikke kan forskydes. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi på det kraftigste, at du lægger madrassen på gulvet med CloudCuddle omkring den.
- **Lynlåse:** Alle lynlåse skal være lukkede. Både lynlåsene på rammeovertrækket, lynlåsene på det gennemsigtige net og lynlåsene på lagenet.
- **Lynlåsløbere og trækvedhæng på netlynlåse:** Sørg for, at lynlåsløbere er helt lukkede mod hinanden med trækvedhæng liggende fladt mod lynlåsen. Kun på denne måde er lynlåsene låste og kan ikke åbnes inde fra.
- **Rammelynlåse og snore:** Snorene skal altid være fastgjorte og lynlåsene (8 stk.) skal altid være lukkede.
(Se **foto 9, 9a og 10** på side 5)
- Lad aldrig nogen være i CloudCuddle uden overvågning.
- Du bedes omgående rapportere sikkerhedsrelaterede hændelser ved CloudCuddle til info@cloudcuddle.com.



Figur E

C. Egenskaber

Produkt

- Sammenfoldeligt sengetelt

Overensstemmelse

- CE-mærkning
- Medicinsk udstyr i klasse I
- Unikke identifikationskoder (GTIN):

Overtræk:	8719325611625
Ramme:	8719325611618
Lagen:	8719325611595
Pumpe:	8719325611564
Taske:	8719325611557

Anvendelse

Egenskab

- Beroligende og afskærmende sengesikring.

Beregnet til

- Børn, der uønsket kan kravle eller falde ud af sengen på grund af fysisk og psykisk handicap.
- Brugers vægt: Maks. 50 kg.

Anvendes sammen med:

- 1-personsmadras på 200 cm x 90 cm x 16-26 cm med en vægt på mindst 11 kg.
- 1-personsseng egnet til madras på 200 cm x 90 cm x 16-26 cm med en vægt på mindst 20 kg
- Højdejusterbar seng, hvor:
 - Siderne kan skubbes ned, således CloudCuddle's ramme har plads nok ved siden af madrassen;
 - ryg- og fodjustering kan blokeres. Denne justering må aldrig ikke bruges sammen med CloudCuddle;
 - højden kan indstilles til 50 cm over gulvet.
- På gulvet: CloudCuddle kan bruges med madrassen direkte på gulvet.

Adgang til CloudCuddle:

- CloudCuddle er symmetrisk og kan åbnes helt på begge langsider.
- For at få adgang til eller komme ud af CloudCuddle skal netlynlåsene være helt åbne.
- Luk altid nettet helt. Bemærk! Lynlåsløberne skal være lukkede helt mod hinanden med trækvedhæng liggende fladt mod lynlåsen (**figur E**). Kun på denne måde er lynlåsene helt låste og kan ikke åbnes inde fra.

Kontraindikationer:

- Kendt reaktion over for (økologisk) bomuld, elastan, polyethylen, polyamid/nylonpolyester og/eller polyurethan;
- Meget sensitiv hud-> risiko for hudafskrabning;
- Strukturelt intens fysisk aktivitet, hvor personer konstant falder med deres fulde vægt mod siderne af CloudCuddle.

A. CloudCuddle-dele

1. Overtræk
2. Ramme
3. Lagen (**foto 14**)
4. Pumpe (**foto 12**)

1. Overtræk (rørovertræk-net-madrasovertræk)

1.1 Rørovertræk (beskytter den oppustede ramme)

(foto 1)

- a Farvede 'ben'
- b Hvide 'sokker' (én med åbning til ventil)
- c Åbning til ventil
- d Ventilovertræk (med velcrobånd)
- e Trykknop (til at lukke overtrækket i toppen) (**foto 2**)
- f To lynlåse i forskellige farver: blå med blå trækvedhæng (til at åbne/lukke rørovertræk) og hvid med hvide trækvedhæng (til at åbne/lukke net)
- g Spændestroppe med spændeanordninger til fastgørelse til sengeramme (spændestrop ved hvert ben).

1.2 Gennemsigtigt net (foto 3)

- h Lynlås
- i Hvide trækvedhæng (til at åbne/lukke net)
- j Gennemsigtigt net (er forbundet med madrasovertræk og rørovertræk)

1.3 Gennemsigtigt net (foto 4)

- k Overtræk
- l 4 spændestroppe til fastgørelse til madras
- m Lagen som kan skiftes (**foto 5**)

Begyndelsespunktet på lynlåsen er synligt foroven på lagnet
Lynlåsløberen sidder på undersiden af lagnet.

2. Oppustelig ramme (er anbragt i rørovertrækket)

- n Oppustelige rør (**foto 6**)
- o Ventil (**foto 18 og 19 på side 6**)
- p Tilslutningsslanger
- q Rørklemmer

Klemmer åbne: **foto 7**

Klemmer lukkede: **foto 8**

- r 1. Rammelynlåse (r1) (8x) (**foto 9**), 2. Rammesnøre (r2) (2x) (**foto 9a**) 3. Rammeløkker (r3) (2x) (**foto 9a**)

Lynlåsene giver adgang til det indvendige rør. Snore til ekstra sikring af position på det indvendige rør. Lynlåsene skal altid være lukkede og snorene være

fastgjorte til rammen. Sørg for, at de ALDRIG åbnes ved et uheld, når CloudCuddle er pustet op. Snorene skal være fastgjorte til rammeløkkerne (r3, **foto 9a**). Rør ikke disse snore og træk ikke i dem! De er forbundet til det indvendige rør via en lille åbning (O, **foto 9a**). Hvis du trækker i dem kan du risikere at trække det indvendige rør ud, hvilket kan beskadige det.

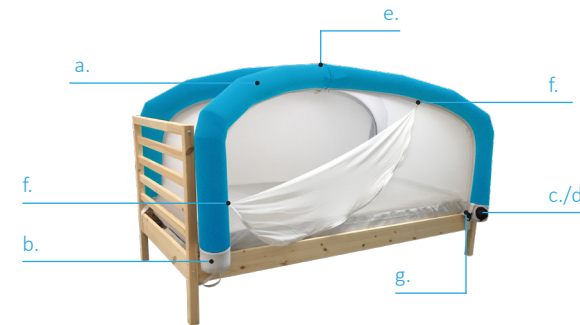


Foto 1:



Foto 2:

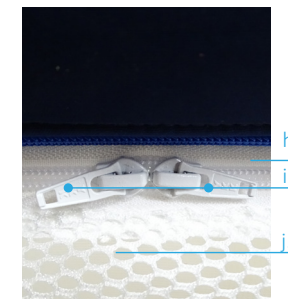


Foto 3:

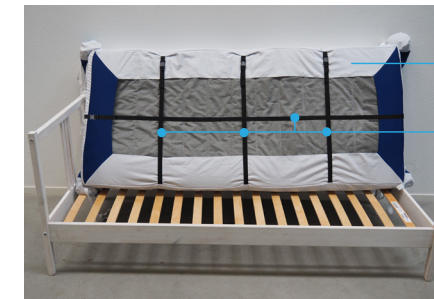


Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

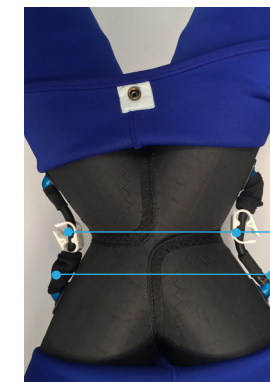


Foto 7:



Foto 8:





Foto 9:



Foto 9a:



Foto 11:



Foto 12:



Foto 13:



Foto 14:

B. Tekniske specifikationer

- Vægt: 6,8kg

Mål:










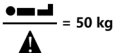
- Udvendigt mål: 200cm x 110cm x 105cm
- Indvendigt mål: 200cm x 90cm x 70cm
- Siddehøjde 70 m
- CloudCuddle Junior: 60cm x 40cm x 30cm
- Lufttryk i ramme: 0,45bar

Materialer

- Ramme: Polyester og polyuretan
- Overtræk: Polyester
- Lagen: Bomuld
- Taske **(foto 11)**
- Pumpe **(foto 12)**

C. Mærkning

Forklaring af symboler

	Producent		Skal holdes tørt
	Produktionsdato Oprindelsesland		Se brugsanvisningen inden brug
	Katalognummer		Advarsel
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Holdes væk fra sollys		Maksimal vægt

A. Pumpetype

Brug håndpumpen, som følger med CloudCuddle, og følg instruktionerne på det medleverede mærkat.

B. Anvendelse

1. Kontroller først, at rørklemmerne er åbne (de er placeret under overtrækket ved rørenes krydspunkt). **(foto 15)**.
2. Slut slangen til pumpen på siden med INFLATE **(foto 16)**. Fastgør den anden ende til det korrekte koblingsstykke **(foto 17)** på ventilen **(foto 18, 19)**.
3. Trykket i rørene skal være 0,45 bar (*6,5 psi). Dette tryk er nået, når du ikke længere kan trykke rørene sammen.
- ⚠ 4. I toppen af den oppustelige ramme, ved rørenes krydspunkt, er der rørklemmer til at lukke forbindelsen mellem rørene. Luk disse **(foto 15)**.
- ⚠ 5. **Ved brug flere dage i træk:** Bruger du CloudCuddle flere dage i træk? Du skal være opmærksom på, at lufttrykket i CloudCuddle kan reduceres på grund af temperatursvingninger. Kontroller regelmæssigt rammens hårdhed. I gennemsnit skal du tilføje ekstra luft én gang ugentligt.



Foto 15:



Foto 16: Håndtag foroven: INFLATE- DEFLATE.



Foto 17: Koblingsstykke slange-ventil.

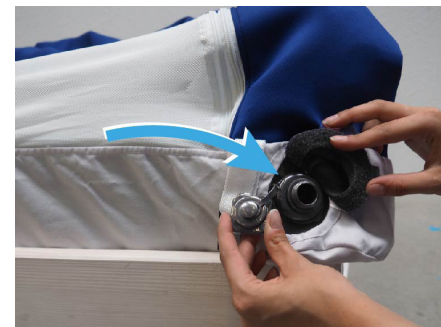


Foto 18: Åben ventilhætte.



Foto 19: Slange med koblingsstykke fastgjort til ventil.

Der kan ses en instruktionsvideo på vores hjemmeside (www.cloudcuddle.com, under 'product/gebruik') Instruktionsvideoen er ikke en erstatning for brugsanvisningen, men tjener til at illustrere og supplere den.

A. Opsætning af CloudCuddle

1. Tag CloudCuddle ud af tasken og rul den ud.
- ⚠️ 2. Åbn rørovertrækket og kontroller, om rammelynlåsene er lukkede (**figur A og B**). Dette skal altid kontrolleres, når rammen er tom for luft. Åbn aldrig rammelynlåsene, når rammen er oppustet.
3. Fastgør undersiden (det såkaldte madrasovertræk inklusive lagen med lynlås) til madrassen som var det et lagen med elastik (**foto 20**). Hjørnerne skal side korrekt omkring madrassens hjørner.
4. Vip madrassen op for at fastgøre spændestroppe under madrassen. Stropper er forsynet med spændeordninger (**foto 21**). Spænd stropperne ved at trække i den løse ende (som stikker ud af klik-spændeordningen).
5. Pump CloudCuddle op i henhold til pumpeinstruktionerne (**se side 6**).
6. UDFØR KUN DETTE TRIN VED BRUG PÅ EN SENGERAMME. Der er anbragt en spændestrop med spændeordning i hvert hjørne af CloudCuddle. Fastgør stropperne omkring sengerammen og luk spændeordningerne. Træk stropperne til, således de sidder stramt og kan forskyde sig (**foto 22**).
- ⚠️ 7. Sørg for, at der er plads til, at CloudCuddle kan antage sin fulde størrelse (200 cm (l) x 110 cm (b) x 105 cm (h)). Hvis CloudCuddle klemmes, opstår der for meget tryk på rammens søm (**figur C**). Det kan forårsage, at sømmene slides, hvilket kan få rammen til at revne og slippe tryk under tryk ud. Højden på 105 cm er inklusive en madras, som er 16 cm tyk. Benene på CloudCuddle skal kunne stå frit ved siden af en madras på 90 cm i en samlet bredde på 110 cm. De stikker en smule ud ved siden af sengerammen. Skub dem ikke indad (**figur D**). Ved en højdejusterbar seng skal du sørge for, at siderne er klappet ned. Afstanden mellem hoved- og fodgærde skal være mindst 200 cm. Der må ikke være fastgjort planker, som stikker indad, ved hovedgærdet og fodenden.

Kontrol under opsætning

Se sikkerhedsadvarsler (kapitel I. B)

B. Nedtagning af CloudCuddle

1. Åbn spændeordningerne og løs stropperne fra rammen (**foto 23**).
2. Åbn trykknappen på overtrækkets ryg (**foto 24**).
3. Åbn klemmerne ved rørenes krydspunkt (**foto 15**).
4. Åbn ventilen ved at skrue den bageste riflede ring af, og tøm CloudCuddle for luft. (**foto 25**). På grund af trykket slippes luften ud med et højt brag. Bliv ikke forskrækket.
5. Løs stropperne under madrassen ved at åbne spændeordningerne (**foto 26**), og fjern CloudCuddle fra madrassen.



Foto 20: Fastgør madrasovertrækket.



Foto 21: Fastgør spændestroppe under madrassen.



Foto 22: Fastgør stropperne og træk dem til.




Foto 23: Åbn spændeordningerne og fjern stropperne.



Figur A: Rammetype 1.



Figur B: Rammetype 2.

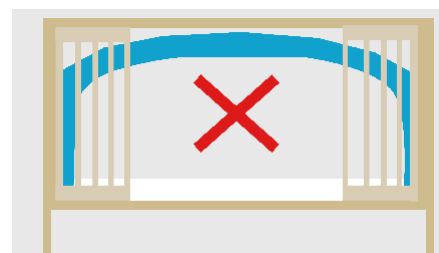

Figur C:



Figur D:

6. Klem så meget luft ud af rørene som muligt ved at rulle CloudCuddle op fra enden af benene. Sørg for, at benet med den åbne luftventil forbliver frit, ellers kan luften ikke slippe ud. Se eventuelt instruktionsvideoen på hjemmesiden (under 'product/gebruik').

Kontrol under nedtagning

- Du lukker luften ud ved at skrue den bageste ventilhætte af (rund med riflet kant). Vær opmærksom på, at luften i rørene er under tryk og frigives med et højt brag, når du skruer hættten af.
- Kontroller, at klemmerne ved tilslutningsslangerne er åbne. Hvis klemmerne er lukkede, kan luften ikke slippe ud af de bageste rørsektioner.

C. Vedligeholdelse, sammenrulning og opbevaring

Vedligeholdelse

Der er ikke meget vedligeholdelse ved CloudCuddle.

Sammenrulning

1. Læg CloudCuddle fladt med net og rør øverst og madrasovertrækket nederst. Tag en 'sok' på CloudCuddle, og stop den i ind et hjørnepunkt på madrasovertrækket (**foto 27**). Gentag dette trin for de tre resterende sokker.
2. Fold efterfølgende madrasovertrækkets sider indad (**foto 28**).
3. Fold begge sider indad i længden. Nettet og rørene er nu pakket ind i madrasovertrækket (**foto 29**). CloudCuddle er beskyttet optimalt under transport.
4. Rul CloudCuddle (stramt) op og anbring den i tasken (**foto 30**).

Opbevaring

- Rul CloudCuddle sammen efter brug i henhold til instruktionerne i denne brugsanvisning.
- Sørg for, at lagnet er rent. Tag eventuelt lagnet af for at vaske det, og opbevar det separat.
- Opbevar CloudCuddle i en (weekend)taske i et tørt rum ved stuetemperatur.
- Placer ikke tunge genstande på CloudCuddle-tasken, når du rejser eller opbevarer den.
- **Omgivelsestemperatur for CloudCuddle-rammen:** CloudCuddle-rammen må aldrig udsættes for temperaturer på over 50 °C. Denne risiko er især til stede, når CloudCuddle befinder sig i en bil i solen. Temperaturen kan så stige til langt over denne værdi.

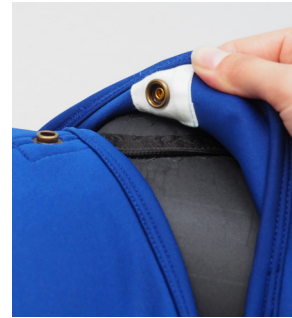


Foto 24: Åbn trykknappen på ryggen.

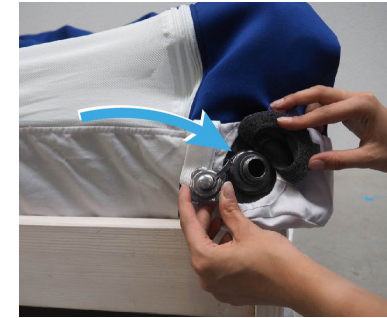


Foto 25: Åbn den bageste ventilhætte, og slip luften ud.



Foto 26: Løsn stropperne.



Foto 27: Stop hver 'sok' i et hjørne af madrasovertrækket.



Foto 28: Rørøvertræk og net ovenpå.



Foto 29: Fold 2 gange i længden mod midten.



Foto 30: Rul CloudCuddle op.

A. Rengøring

- Fjern rammen fra overtrækket.
- Vaskemiddel: Alle vaskemidler, som er egnede til vask af tøj og sengetøj, kan anvendes til CloudCuddle-lagner og overtræk.
- Lagnet kan lynes af og vaskes separat.
- Den oppustelige ramme må ikke vaskes i vaskemaskine.
- Både lagen og overtræk kan vaskes ved 60°.
- Vær opmærksom på, at det blå stof kan smitte af på det hvide stof. Jo højere vasketemperaturen er, jo mere farve afgiver stoffet. Det betyder intet for kvaliteten.
- Kun lagnet må tørres i tørretumbler; ikke resten af overtrækket. For holdbarhedens skyld er det bedst at koldtørre lagnet i tørretumbler eller lufttørre det.



B. Vask af lagen

Når du lyner lagnet af eller på, behøver du ikke at tømme CloudCuddle for luft eller helt fjerne den madrassen. Det er afgørende for sikkerheden i CloudCuddle, at alle tekstiler er så stramme som muligt. Derfor er det nødvendigt, at CloudCuddle har en smule 'spillerum', især ved pålyning, som beskrevet nedenfor.

Aflyning:

- Sørg for, at CloudCuddle har en smule spillerum i alle hjørner ved at løsne spændestropperne, som fastgør CloudCuddle til rammen, og skub CloudCuddle en smule af madrassen (**foto 31**).
- Stik en hånd ind mellem madras og lagen under CloudCuddle, hvor lagnets lynlåsløber sidder (**foto 32**).
- Lyn lynlåsen så meget op, at lynlåsløberen bliver synlig fra oven; derefter kan du lyn lynlåsen op på oversiden.



Foto 31: Skub CloudCuddle en smule af madrassen.

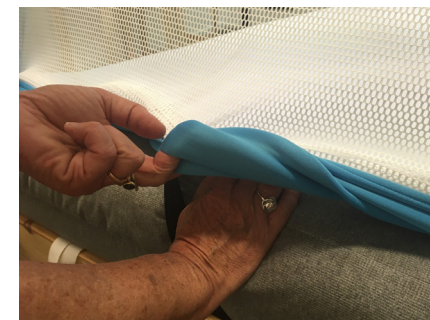


Foto 32: Stik en hånd ind mellem madras og lagen for at komme til lynlåsløberen.



Foto 33: Fjern de sorte rammerør fra overtrækket.



Foto 34: Anbring røret i bunden af den hvide sok.

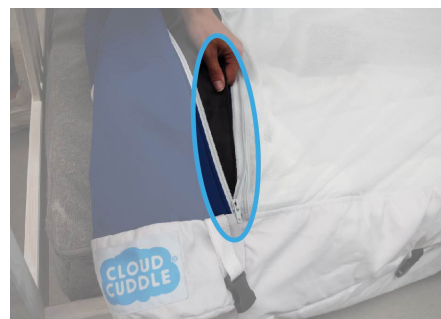


Foto 35: Rørsømmen skal vende mod lynlåsen.

Pålyning:

- Sørg for, at CloudCuddle har en smule spillerum i alle hjørner ved at løsne spændestroppeperne, som fastgør CloudCuddle til rammen, og skub CloudCuddle en smule af madrassen. Så er det meget nemmere at lyne lynlåsen omkring hjørnerne.
- Fold derefter CloudCuddle-overtrækket rundt om madrassens hjørner, og fastgør spændestroppeperne igen.
- Luk lynlåsen på det lange stykke ved at stikke en hånd ind mellem madras og lagen.

C. Vask af hele CloudCuddle-overtrækket

1. Tag CloudCuddle ned, som beskrevet i [kapitel IV, B Nedtagning af CloudCuddle \(side 7\)](#)
2. Lyn overtrækket op, og tag de sorte oppustelige rør ud **(foto 33)**.
3. Sørg for, at alle lynlåse og spændeanordninger er lukkede før vask.
4. Det anbefales at vaske overtrækket ved en lav temperatur. Om nødvendigt kan det vaskes ved 60°. Du kan anvende dit sædvanlige vaskemiddel.
5. CloudCuddle-overtrækket må ikke tørres i tørretumbler.



D. Anbringelse af rammen i overtrækket

1. Når overtrækket er rent og tørt, kan du anbringe de oppustelige rør i overtrækket igen.
 2. Lyn overtrækket helt op, og anbring rørene i overtrækket ét for ét. Begynd ved benet med luftventilen. Anbring enden af det oppustelige rør helt nede i bunden af den hvide 'sok'. **(foto 34)**, og luk overtrækket med lynlåsen. Udfør dette trin for alle ben.
- N.B. Sørg for, at sømmen på det oppustelige rør vender mod lynlåsen på rørovertrækket. **(foto 35)**.

E. Retningslinjer for genanvendelse

CloudCuddle er egnet til genanvendelse.

- Vask CloudCuddle-overtrækket og det tilhørende lagen i henhold til vaskeanvisningerne i dette kapitel.
- Kontroller overtræk, lagen og ramme for eventuelle defekter, og få dem om nødvendigt repareret hos CloudCuddle.

Inden første brug

- Udnyt altid muligheden for at teste CloudCuddle på forhånd for at vurdere, om det er et passende hjælpemiddel i din situation.
- Første gang du sætter CloudCuddle op, er det nødvendigt, at den oppustelige ramme først 'sætter' sig i overtrækket. Det kan hænde, at et ben er snoet. Drej om nødvendigt benet en smule, og træk overtrækket korrekt rundt om det. Giv overtrækket spillerum, hvor det er nødvendigt, ved at lukke lidt luft ud og derefter fylde luft i igen.
- For at gøre situationen mere fortrolig for dit barn kan du vaske lagenet eller hele CloudCuddle-overtrækket først for at give det en genkendelig duft. Sørg for først at fjerne de oppustelige rør. De må ikke vaskes i vaskemaskinen.
- Vi anbefaler, at du tester CloudCuddle i hjemmet et par nætter, før du f.eks. tager den med på ferie.

Inden hver brug

- Inden hver brug skal du pumpe CloudCuddle op tre timer i forvejen for at kontrollere, at den stadig er i god stand og f.eks. ikke mister luft.
- Kontroller alle tekstiler, stropper, lynlåse, sømme og spændeanordninger for defekter.

- Mister CloudCuddle langsomt luften? Kontroller først, at ventilen er korrekt lukket. Hverken ventilringen (bageste riflede ring) eller hættten må slippe luft ud.
- Fyldes et rør ikke med luft under pumpning eller tømmes under nedtagning? Kontroller først, om rørklemmerne (ved de oppustelige rørs krydspunkt) er åbne.
- Sidder nettet fast i lynlåsen? Åbn lynlåsen langsomt og fjern forsigtigt nettet fra lynlåsen.
- Passer CloudCuddle ikke i tasken? Forsøg at rulle mere luft ud af rørene. Kontroller også, at rørklemmerne og/eller ventilen er åbne.
- Kan CloudCuddle åbnes indefra? Sørg for, at lynlåsløberne er lukkede helt mod hinanden med trækvedhæng liggende fladt mod lynlåsen. Den bedste position på trækvedhængene er i midten **(se figur E, side 3)**.
- Er noget beskadiget eller defekt? Så skal du omgående kontakte Human Protection.
- Hvis CloudCuddle's ben bøjer, når dit barn ligger mod nettet, er CloudCuddle ikke pustet hårdt nok op. Kontroller hårdheden, og fyld om nødvendigt med mere luft.

PASSER I EN WEEKENDTASKE OG ER
NEM AT TRANSPORTERE



Human Protection B.V.
Droogdokkeneiland 4, 5026 SR Tilburg
info@cloudcuddle.com - www.cloudcuddle.com - +31 (0)13-303 30 30