

CE UK
CA

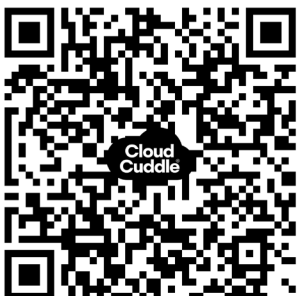


Human Protection B.V.
Droogdokkeneiland 4
5026 SR Tilburg, Nederland
tel. +31 (0)13 536 38 07

Brugsanvisning

I.	Formålet med hjælpemidlet	1
1.1	Den tilsigtede bruger	1
1.2	Det tilsigtede formål	1
1.3	Indikationer	1
1.4	Kontraindikationer	1
1.5	Beskrivelse af hjælpemidlet	2
1.6	Fordelene ved CloudCuddle Maxx	2
1.7	Anvendelsesområder	2
1.8	Teknisk egnethed	3
II.	Procedure for brug af CloudCuddle Maxx	4
2.1	Forsvarlig brug og sikkerhedsadvarsler	4
2.2	Kontrolliste før brug	4
2.3	Uddannelse af plejepersonale	5
2.4	Brug ved tvungen pleje	5
2.5	Montering	5
2.6	Opsætning	6
2.6.1	Instruktioner til oppustning af rammen	6
2.6.2	Kontrol af trykket i rammen	6
2.6.3	Ventil og 3 rørklemmer	7
2.6.4	Første brug (periode hvor produktet stabiliseres)	7
2.7	Fastgørelse og sikkerhed	7
2.7.1	Ramme og lufttryk	7
2.7.2	Spændebånd og fastgørelsesanordninger	7
2.7.3	Lagen og lynlåslukninger	8
2.7.4	Medicinske gennemføringsåbninger	8
2.7.5	Brug med patientløfter	8
2.7.6	Adgang i forbindelse med intensiv pleje og nødsituationer	8
2.7.7	Generelle sikkerhedsbetingelser	9
2.8	Under brugen af CloudCuddle Maxx	9
2.9	Hændelser og feedback	9
III.	Komponentdele af CloudCuddle Maxx	11
3.1	Overtræk	12
3.2	Oppustelig ramme	12
3.3	Lagen	12
3.4	Pumpe	12
3.5	Taske	12
3.6	Adgangssæt	13
3.7	Stabilitetsstroppe	13
3.8	Topmadrasser	13
3.8.1	Tekniske specifikationer	14
IV.	Tekniske specifikationer	15
4.1	Mål	15
4.1.1	Vægt	15
4.1.2	Maksimal belastning	15
4.2	Reserve dele	15
V.	Mærkning	17
5.1	Producent- og repræsentantoplysninger	17
5.2	Mærkater pr. komponentdel	17
5.3	QR-kode	17
5.4	Symbolforklaring	18
VI.	Brug af CloudCuddle Maxx	19
6.1	Opsætning	19
6.1.1	Tjekpunkter efter opsætning	22
6.2	Nedtagning	23

VII.	Vaskeanvisninger	25
7.1	Vaskeanvisninger	25
7.1.1	Sygehuse og plejehjem	25
7.1.2	Ved brug i private hjem	25
7.2	Rengøring, desinfektion og vedligeholdelse for sygehuse og plejehjem	25
7.2.1	Udskiftningsinterval ved langvarig brug	25
7.2.2	Overfladerengøring ved løbende brug	25
7.2.3	Vedligeholdelse og kontrol	25
7.2.4	Videre brug	25
7.2.5	Brug i professionelt plejemiljø	26
7.3	Rengøring ved hjemmebrug	26
7.4	Vask af lagen	26
7.4.1	Lyne lagnet af	26
7.4.2	Lyne lagnet på	27
7.5	Vask af overtræk	28
7.5.1	Rengøring og desinfektion af den oppustelige ramme	30
7.5.2	Sæt ramme tilbage	30
VIII.	Problemløsning	32



Scan QR-koden for at se CloudCuddle Maxx-instruktionsvideoerne.

CloudCuddle Maxx er et CE-mærket medicinsk hjælpemiddel i klasse I, der er designet som et flytbart og oppusteligt sengetelt. Produktet skaber en tryk hvile- og soveplads til børn og voksne med særlige plejebehov.

1.1 Den tilsigtede bruger

Dette medicinske hjælpemiddel er beregnet til brug af:

- Forældre, plejere og pårørende, der yder omsorg i hjemmet.
- Plejepersonale, herunder sygeplejersker, støttepersoner og behandlere

Den indliggende: Børn og voksne med særlige plejebehov, med:

- En maksimal højde på 193 cm
- En maksimal vægt på 100 kg
- Øget risiko for fald, vildfarelse, tilskadekomst og/eller overstimulering.

1.2 Det tilsigtede formål

CloudCuddle Maxx er designet till at skabe et sikkert og afgrænset hvile- og sovemiljø, som understøtter udvikling af og bibeholder en sund døgnrytme samt bidrager til en følelse af komfort og tryghed.

1.3 Indikationer

CloudCuddle Maxx er udviklet til at understøtte nattesøvnen og fremme fornemmelsen af tryghed hos personer med øget risiko for natlige hændelser eller uro. CloudCuddle Maxx-sengeteltet er egnet til brug ved følgende indikationer:

- Nattevandring/vildfarelse og/eller desorientering.
- Risiko for fald.
- Uønsket forsøg på at komme ud af sengen.
- Tilskadekomst som følge af ukontrollerede bevægelser eller selvskade (automutilation).
- Sansesoverfølsomhed/sensorisk overbelastning.
- Undgåelse af fysisk fiksering (alternativ til brug af fiksering).
- Nedsat opmærksomhed eller balance som følge af medicin, neurologisk sygdom eller kognitiv tilbagegang, f.eks. demens.

1.4 Kontraindikationer

Medicinske og fysiske kontraindikationer

Hvis én eller flere af nedenstående kontraindikationer er til stedet, må CloudCuddle Maxx ikke bruges, og den behandlende læge eller behandlende fagperson skal kontaktes.

- Kendt overfølsomhed eller allergi over for et af de anvendte materialer: Økologisk bomuld, polyester, polyamid, zink, kobber, rustfrit stål og/eller nikkel.
- Hud, der er ekstremt følsom over for tryk eller friktion, med øget risiko for hudirritation.
- Øget risiko for åndedrætsproblemer i afgrænsede rum uden tilstrækkelig overvågning.
- Kendt klaustrofobi eller tendens til panikanfald i lukkede rum.
- Klienter/patienter med øget risiko for hæmning af åndedrætsfunktionen. Hvis sundhedspersonalet har konstateret, at luftgennemtrængelige materialer er nødvendige for at forebygge åndedrætsproblemer, er brugen af dette hjælpemiddel ikke egnet.
- Klienter/patienter med en kropsvægt på mere end 100 kg.
- Klienter/patienter med medicinske slanger (f.eks. drop, sonde), som ikke kan føres sikkert gennem de medicinske gennemføringsåbninger.

Adfærdsmæssige og funktionelle kontraindikationer

- Indliggende, der med kraft lader sig falde, kaster sig eller smider genstande mod sidevæggene.
BEMÆRK! Tippefare: Hvis indliggende med kraft lader sig falde, kaster sig eller smider genstande, kan det medføre, at CloudCuddle Maxx tipper. Dette udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko og kan føre til, at den indliggende kommer til skade.
- Alvorlig adfærdspåmatik med risiko for bevidst ødelæggelse af udstyr eller materialer.
- Tiltagende aggressiv, voldelig eller selvdestruktiv adfærd, som udløses eller forstærkes under brug af CloudCuddle Maxx.
- Brug på elektrisk justerbare senge uden sikker og stabil fastgørelse af produktet.

Vigtig advarsel

CloudCuddle Maxx er et understøttende hjælpemiddel, men dets egnethed afhænger af den konkrete situation, diagnose og behov hos

klienten/patienten. I nogle tilfælde kan et afgrænset rum have en negativ effekt, for eksempel ved adfærdsforstyrrelser eller neurologiske lidelser.

Stop straks brugen, hvis

- Klientens/patientens tilstand forværres under eller efter brug af CloudCuddle Maxx.
- Der udvises tegn på panik, åndenød, modstand eller anden negativ adfærd hos klienten/patienten, som kan være forbundet med brug af CloudCuddle Maxx.

I sådanne tilfælde skal en læge eller det behandlende sundhedspersonale omgående kontaktes.

1.5 Beskrivelse af hjælpemidlet

CloudCuddle Maxx er et oppusteligt, flytbart sengetelt, som er udviklet til børn og voksne med forskellige lidelser, der medfører øgede plejebehov og sikkerhedsrisici under søvn. Det kan være fysiske, kognitive eller adfærdsmæssige lidelser, med eller uden yderligere medicinske behandlingsbehov.

Hjælpemidlet skaber et sikkert, afgrænset hvile- og sovemiljø, der kan bidrage til ro, tryghed og beskyttelse mod at falde ud af sengen eller ved ukontrollerede bevægelser. Det hjælper med at reducere eksterne stimuli, hvilket bidrager til et roligere og dybere søvnmønster og dermed forbedrer både søvnkvaliteten og døgnrytmen markant.

CloudCuddle Maxx kan opsættes på langt de fleste enkeltssenge og højdejusterbar seng i løbet af 5 minutter, og er egnet til børn og voksne med en maksimal vægt på 100 kg.

Systemet består af en oppustelig ramme, luftgennemtrængelig ruder af netstof, et integreret madrasovertræk med fastgørelseselementer samt et lagen, som kan lynes af systemet.

CloudCuddle Maxx har gennemføringsåbninger til medicinske slanger, sonder og kabler, således medicinsk behandling kan udføres sikkert og komfortabelt, mens patienten/klienten befinder sig i sengeteltet. Systemet har fire adgangspaneler, således intensiv pleje og/eller adgang i nødsituationer er muligt.

Adgangssættet er et valgfrit tilbehør til CloudCuddle Maxx. Det er designet til at tilpasse brugen CloudCuddle Maxx til både patientens/klientens samt plejerens behov. Sættet omfatter komponentdele, der kan fremme patientens/klientens selvstændighed. Hvis patienten/klienten selv er i stand til det, kan CloudCuddle Maxx åbnes og lukkes selvstændigt indefra. Derudover giver sættet mulighed for ekstra sikkerhed med Quick Release-systemet, som er fæstnet på ydersiden. Det forhindrer uønsket åbning CloudCuddle Max.

Designet er optimeret til både permanent og midlertidig brug, og sengeteltet er nemt at opsætte, nedtage og transportere. Det gør sengeteltet særdeles velegnet til forskellige brugssituationer. Den forventede levetid på CloudCuddle Maxx er 5 til 7 år ved normal brug og vedligeholdelse i henhold til denne brugsanvisning.

1.6 Fordelene ved CloudCuddle Maxx

- Sikker, komfortabel og beroligende ved sensorisk overbelastning.
- Solidt, beskyttende og pålideligt.
- Forhindrer fald fra sengen, natlig uro og vildfarelse.
- Reducerer risikoen for tilskadekomst og kvæstelser som følge af ukontrollerede bevægelser eller selvskadende adfærd (automutilation).
- Oppustelig, let og nem at tage med.
- Kan opsættes i løbet af 5 minutter.
- Kan placeres på næsten enhver enkeltsseng.
- Hygiejnisk og nem at vaske.
- Egnet til både midlertidig og daglig brug.
- CE-mærket medicinsk hjælpemiddel i klasse I.

1.7 Anvendelsesområder

CloudCuddle Maxx er velegnet til både midlertidig og permanent brug, afhængigt af situationen og plejebehovet hos klienten/patienten.

Kan blandt andet bruges:

- I hjemmet.
- I ferieboliger og ved indkvartering.
- På plejehjem (langvarig, handicap- og psykiatrisk pleje).
- På sygehuse.
- Ved midlertidige ophold og aflastningsophold.
- På rehabiliteringscentre.
- På uddannelsesinstitutioner med plejefunktion.
- På krisecentre og ved aflastningsophold.
- På hospicer.



CloudCuddle Maxx er udviklet til brug i indendørs miljøer. Ved afvigende brug eller anvendelse i en særlig kontekst anbefales det at konsultere producenten eller en medicinsk specialist.

1.8 Teknisk egnethed

- Brugerhøjde: maks. 193 cm
- Brugervægt: maks. 100 kg
- Minimal vægt på sengeramme + madras: mindst 66 kg

2.1 Forsvarlig brug og sikkerhedsadvarsler

Nedenstående procedure skal følges omhyggelig for at opnå sikker og ansvarlig brug af CloudCuddle Maxx.

- **Rådfør dig altid med en sundhedsprofessionel før brug**
Før brug af CloudCuddle Maxx skal det afstemmes med en professionel fagperson, at CloudCuddle Maxx er egnet til og sikker for den indliggende.
- **Indhent om nødvendigt samtykke fra den bemyndigede repræsentant**
For voksne, der ikke selv er i stand til at give deres samtykke, skal der forud for brug tages kontakt til – og indhentes godkendelse fra – den bemyndigede repræsentant eller den behandlende plejemedarbejder.
- **Læs hele brugsanvisningen før brug**
Sørg for at være fortrolig med CloudCuddle Maxx opsætning, anvendelse, sikkerhedsinstruktioner, indikationer og kontraindikationer før brug.
- **CloudCuddle Maxx skal opsættes i et stabilt og sikkert miljø**
Sengeteltet må kun bruges på en egnet seng, og alle instruktioner skal følges omhyggeligt. Kontroller dagligt, at CloudCuddle Maxx står stabilt og er solidt fastgjort.
- **Supplerende instruktionsvideoer og oplæring**
- Til forældre og pårørende, der yder omsorg:
Se instruktionsvideoerne på den officielle hjemmeside: www.cloudcuddle.com.
I disse videoer kan du trin-for-trin følge instruktioner for opsætning, brug og opbevaring af CloudCuddle Maxx.
- Til plejepersonale:
Følg de nødvendige trin og instruktioner via Human Protection Academy. Portalen indeholder information om sikker brug i professionelle plejekontekster, herunder brug i plejeplaner, håndtering ved brug til tvungen pleje samt observation under første brug.

Ved tvivl bedes du kontakte Human Protection/CloudCuddle eller konsulter en kvalificeret plejemedarbejder.



Instruktionsvideoerne er et supplement og ikke en erstatning for denne brugsanvisning. Ved tvivl bedes du kontakte os eller konsulter en kvalificeret plejemedarbejder.

- **Begynd med en kort tilvænningsperiode**
Lad den indliggende vænne sig til det nye hvile- og sovemiljø ved at begynde med en kort hvilesession om dagen under opsyn. Byg gradvist brugstiden op til den ønskede varighed.
- **Observer adfærden hos den enkelte klient/patient ved første brug**
Vær opmærksom på tegn på stress, angst, panik eller forværring af adfærd. Hvis klienten/patienten forbliver urolig eller bliver mere urolig, skal denne straks fjernes fra CloudCuddle Maxx og en alternativ løsning overvejes.
- **Kontroller de medicinske tilslutninger**
Hvis den enkelte klient/patient er afhængig af medicinske slanger og/eller udstyr, skal du sørge for, at de/det føres sikkert gennem de medicinske åbninger, uden risiko for knæk eller blokering.
- **Brug af adgangssættet skal ske ansvarligt**
Hvis adgangssættet anvendes, skal det på forhånd vurderes, om den enkelte klient/patient selvstændigt kan åbne CloudCuddle Maxx indefra, eller om ekstra sikring er påkrævet.
- **Overvågning er fortsat nødvendigt**
CloudCuddle Maxx erstatter ikke nødvendigheden for overvågning. Tag altid højde for den enkelte klients/patients plejebehov og tilpas brugen derefter.
- **Sørg om nødvendigt for, at brugen af CloudCuddle Maxx afstemmes efter plejeplanen**
I forbindelse med professionel pleje eller ved langvarige plejeforløb bør brugen af CloudCuddle Maxx tydelig fremgå af den individuelle plejeplan.
- **Udarbejd om nødvendigt en flugtprotokol, og tilpas den efter klientens/patientens specifikke behov**
I situationer, hvor der er risiko for, at den enkelte klient/patient går i panik eller forsøger at forlade CloudCuddle Maxx på en ukontrolleret måde, bør der på forhånd udarbejdes en flugtprotokol. Protokollen skal tilpasses den enkelte klients/patients behov og drøftes med alle relevante plejemedarbejdere og/eller pårørende.
- **Brug kun den medfølgende håndpumpe**
Brug af andre pumper, såsom elektriske luftpumper eller kompressorer, er ikke tilladt. Det kan forårsage skade på produktet og/eller skabe farlige situationer.

2.2 Kontrolliste før brug

Forberedelse

- Brugsanvisningen er læst fuldstændig.

- Det er undersøgt, om der er kontraindikationer som gælder for den indliggende.
- Brug kun efter rådgivning fra en sundhedsprofessionel og i overensstemmelse med plejeplanen.

2.3 Uddannelse af plejepersonale

Alle plejemedarbejdere, der arbejder med CloudCuddle Maxx, skal være fuldt instrueret i ansvarlig og sikker brug af produktet. Dette gælder både i hjemmet og i professionelle plejainstitutioner.

Før brug er det afgørende, at plejemedarbejderen:

- Er fortrolig med organisationens interne protokoller vedrørende frihedsbegrænsende foranstaltninger.
- Er bekendt med gældende national og international lovgivning og regler vedrørende frihedsbegrænsende foranstaltninger, herunder anvendelsen af tvungen pleje, hvis relevant.
- Har gjort sig bekendt med følgende retningslinjer og følger dem i praksis:
 - Instruktionerne i denne brugsanvisning.
 - Advarselserne og sikkerhedsforskrifterne i denne brugsanvisning.



CloudCuddle Maxx er IKKE en erstatning for opsyn eller plejevurdering. Forkert brug uden korrekt oplæring kan føre til farlige situationer eller krænkelse af klientens/patientens rettigheder. Oplæring og overholdelse af retningslinjerne er derfor: Obligatorisk ved professionel brug.

2.4 Brug ved tvungen pleje

Afhængig af situationen og anvendelsen kan brugen af CloudCuddle Maxx betragtes som en form for tvungen pleje, og gældende lovgivning og regler om frihedsbegrænsende foranstaltninger skal observeres.



CloudCuddle Maxx er ikke designet som en fikseringsenhed. Produktet er designet til at skabe et sikkert, afgrænset og komfortabelt sovemiljø, hvor den enkelte klient/patient kan bevæge sig frit i et afgrænset, beskyttet rum.

Hvis der er tale om tvungen pleje, gælder følgende betingelser:

- **Gældende lovgivning og regler om frihedsbegrænsende foranstaltninger skal altid observeres**
Vær altid omhyggelig med at observere gældende lovgivning og regler, når tvungen pleje anvendes. Sørg for, at brugen af CloudCuddle Maxx i denne sammenhæng sker i overensstemmelse med gældende lokale juridiske og etiske retningslinjer.
- **Kvalificeret plejemedarbejdervurdering**
Lad en ansvarlig behandler eller plejemedarbejder vurdere, om indsættelsen af CloudCuddle Maxx som hjælpemiddel ved tvungen pleje er nødvendig og proportional.
- **Samtykke fra den bemyndigede repræsentant**
Indhent eksplicit samtykke fra den enkelte klient/patient, eller – hvis den enkelte klient/patient ikke selv er i stand til at give sit samtykke – dennes bemyndigede repræsentant - før brug af CloudCuddle Maxx.
- **Udarbejdelse af flugtprotokol**
Udarbejd om nødvendigt en flugtprotokol, der er tilpasset den enkelte klients/patienters individuelle plejebestanden. Alle relevante plejemedarbejdere skal inkluderes i denne proces.
- **Registrering i plejelog**
Registrer indsættelsen af CloudCuddle Maxx som frihedsbegrænsende foranstaltning i plejeloggen, herunder begrundelse, evaluering og involverede plejemedarbejdere, i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning og regler.

2.5 Montering

Må kun bruges på:

- Enkelt seng med madras på 200 x 90 x 12-26 cm (L x B x H).
- Minimal vægt på sengeramme + madras: mindst 66 kg
- Højdejusterbar seng, hvis fastgørelse til bevægelig del er mulig.

CloudCuddle Maxx kan under visse betingelser bruges på en højdejusterbar seng, forudsat at sengen opfylder nedenstående betingelser. Forkert brug kan føre til ustabilitet og farlige situationer.

En højdejusterbar seng skal opfylde følgende betingelser:

- **Siderne kan skubbes ned**
Siderne (sengeheste) skal kunne skubbes helt ned, således rammen på CloudCuddle Maxx har plads nok omkring madrassen. Der må ikke være risiko for klemning mod ramme og sengeheste.
- **Ryg- og fodjusteringsmekanismen skal være blokeret**
Sengens ryg- og fodjusteringsmekanisme skal være fuldstændig blokeret under brug af CloudCuddle Maxx. Disse funktioner må under ingen omstændigheder anvendes i kombination med systemet, da det kan føre til beskadigelse, ustabilitet og/eller tilskadekomst.
- **Brug i laveste position**
Brug altid CloudCuddle Maxx i den laveste position. Under brug gælder en sengehøjde på maksimal 50 cm, undtagen under pleje.

Må ikke bruges på

Brug ikke CloudCuddle Maxx på følgende sengetyper:

- Gulvmadrasser, dobbeltsenge, køjesenge, senge uden ben.
- Senge med faste sengeheste eller lamelbund højere end 50 cm
- Senge med justerbar liggeflade, medmindre:
 - Justeringsmekanismen er fuldstændigt og permanent aktiveret.
 - Sengen vedvarende er låst i vandret stilling, når den bruges med CloudCuddle Maxx.



CloudCuddle Maxx understøtter ikke brug af ryg- eller fodjustering.

- Luftmadrasser:
Disse giver ikke tilstrækkelig stabilitet for sikker placering og fastgørelse.
- Tryksårsforebyggende madrasser med aktive systemer, såsom:
 - Low air loss-madrasser
 - Vekseltryk-madrasser

Disse madrastyper er ikke kompatible med fastgørelsesanordningen og rammen på CloudCuddle Maxx.

Krav

- CloudCuddle Maxx skal kunne folde sig ud til sine fulde udvendige mål, som følger: 200 x 126 x 110-120 cm. (L x B x H)
- CloudCuddle Maxx skal placeres fritstående, uden at berøre vægge, loftskonstruktioner eller andre forhindringer.
- Placer ikke CloudCuddle Maxx i nærheden af skarpe genstande eller varmekilder.
- Undgå klemning. CloudCuddle Maxx må ikke klemmes fast mod sengeheste.
- Sørg for korrekt fastgørelse. Forkert fastgørelse kan føre til ustabilitet og farlige situationer.
- Vær opmærksom på temperaturbegrænsninger: Rammen på CloudCuddle Maxx må ikke udsættes for temperaturer over 50 grader. Undgå opbevaring i varme køretøjer, i nærheden af varmeapparater eller i direkte sollys på varme dage.

2.6 Opsætning

Opsæt altid CloudCuddle Maxx omhyggeligt og fuldstændigt i henhold til de foreskrevne trin. Korrekt opsætning er afgørende for stabil og sikker brug.

2.6.1 Instruktioner til oppustning af rammen

Brug kun den medfølgende håndpumpe til at puste CloudCuddle Maxx op.

- Indstil pumpen til stand 1.
- Udfør 70 fulde pumpebevægelser for at puste rammen helt op.
- Følg instruktionerne nøje: Opsætning og nedtagning (**kapitel 6**).

2.6.2 Kontrol af trykket i rammen

CloudCuddle Maxx er tilstrækkeligt oppustet, når:

- Rammen er fast og formstabil og ikke kan trykkes ind med hånden.

- Nettet er synligt stramt og ikke hænger slapt.



Brug aldrig en elektrisk pumpe. Dette kan føre til overtryk, skader på materialet eller endda eksplosion af rammen.

2.6.3 Ventil og 3 rørklemmer

Korrekt lukning af luftcirkulationen er afgørende for stabiliteten og sikkerheden af CloudCuddle Maxx. Kontroller og brug ventilen og 3 rørklemmerne i henhold til følgende instruktioner:

- Kontroller, at den takkede bageste ring på ventilen er korrekt skruet fast. Sørg for, at snoren ligger frit og kontroller, at der ikke høres hvislende lyd.
- Luk ventilhætten korrekt, og sæt det medfølgende beskyttelsesdæksel over ventilen.
- Efter oppustning: Monter 3 rørklemmerne øverst på rammen. Dette lukker luftkamrene og opretholder lufttrykket.
- Åbn kun 3 rørklemmerne, når der skal tilføres ekstra luft.
- Luk 3 rørklemmerne straks efter at have tilført luft for at undgå tryktab.



Forkert brug af ventiler eller rørklemmer kan føre til lufttab, ustabilitet i rammen og farlige situationer.

2.6.4 Første brug (periode hvor produktet stabiliseres)

Ved første brug skal CloudCuddle Maxx have været opsat i mindst 3 timer.

Efter stabiliseringsperioden skal der udføres en grundig kontrol. Følgende skal kontrolleres:

- **Rammens stabilitet**
Rammen skal føles fast og formstabil og må ikke kunne trykkes ind med hånden.
- **Lufttryk**
Kontroller, om luftkamrene er helt oppustet, og om rørklemmerne øverst er lukkede for at forhindre tryktab.
- **Lynlåse**
Sørg for, at alle lynlåse lukker let og er helt lukkede, herunder lynlåsen på rammeovertrækket, det fastlynedede lagen og de medicinske åbninger.
- **Fastgørelse af madrassen**
Kontroller, at spændebåndene er korrekt fastgjorte omkring madrassen og, hvis relevant, til sengerammen eller sengebænk. Sørg for, at spænderne sidder ordentligt fast og ikke kan forskubbes.

2.7 Fastgørelse og sikkerhed

For at sikre sikker brug af CloudCuddle Maxx skal alle fastgørelsesanordninger og sikkerhedsforanstaltninger anvendes korrekt og fuldstændigt. Gennemgå følgende kontrolpunkter før hver brug.

2.7.1 Ramme og lufttryk

- Rammen er helt og fast oppustet. Den må ikke kunne trykkes ind med hånden.
- Rørklemmerne øverst er lukkede, således luftkamrene er aflukkede.

2.7.2 Spændebånd og fastgørelsesanordninger

- Fastgør spændebåndene rundt om madrassen og, hvis muligt, også til benene på sengerammen.
- Spænderne skal sidde godt fast og må ikke kunne forskubbes.
- Hvis tilgængelig, brug også de ekstra fire spændebånd til fastgørelse til hoved- og fodenden.
- Ved brug på en højdejusterbar seng: Fastgør kun spændebåndene til den bevægelige del af sengerammen.
- Ved en transportabel seng: Sørg for, at bremserne er aktiveret.

2.7.3 Lagen og lynlåslukninger

- Brug altid CloudCuddle Maxx med lagnet fuldstændigt fastgjort med lynlås. Uden dette lagen kan klienten/patienten krybe ind mellem madrasovertrækket og sengerammen.
- Kontroller, at følgende lynlåse fungerer korrekt og kan lukkes helt uden problemer:
 - Lynlås på rammeovertrækket.
 - Lynlås på lagnet.
 - Lynlåse på nettet på alle fire sider.
 - Lynlåse på de medicinske gennemføringsåbninger.

2.7.4 Medicinske gennemføringsåbninger

- Formålet med de medicinske gennemføringsåbninger er at garantere sikker gennemføring af medicinske slanger til f.eks. drop eller sonde uden at skulle åbne CloudCuddle Maxx **(foto 7)**.
- Kontroller, at de 3 gennemføringsåbninger er lukkede, og at lynlåstrækkerne ligger fladt (er låste). Brugen af de 3 gennemføringsåbningerne skal altid vurderes og godkendes af en medicinsk fagperson.
- Hver åbning er forsynet med en lynlås med en låsbar lynlåstrækker, som lægges fladt for at forhindre uønsket åbning.
- Slangere må aldrig føres gennem nettet eller andre dele af overtrækket. Sørg for uhindret gennemstrømning, ingen knæk på eller klemning af slangen.
- Luk lynlåsen så meget som muligt efter gennemføring af slangen.



Foto 7

Må kun bruges efter drøftelse med en medicinsk fagperson og i overensstemmelse med behandlingsplanen.

2.7.5 Brug med patientløfter

Brug af personløfter i kombination med CloudCuddle Maxx.

- [Aktiv personløfter](#)
En aktiv personløfter kan altid bruges sikkert i kombination med CloudCuddle Maxx.
- [Passiv personløfter – siddende overføring](#)
En passiv personløfter kan bruges, når klienten/patienten skal løftes ud af eller ind i CloudCuddle Maxx i siddende position.
- [Passiv personløfter – liggende overføring](#)
Ved liggende overføring med en passiv personløfter skal CloudCuddle-rammen lægges helt fladt ned ved at tømme luftkamrene helt for luft. Dette forhindrer klemning og sikrer sikker og stabil overføring.

2.7.6 Adgang i forbindelse med intensiv pleje og nødsituationer

- Systemet har fire adgangspaneler, således intensiv pleje og/eller adgang i nødsituationer er muligt **(foto 8)**.
- Hoved- og fodenden er udstyret med ekstra åbninger for akut medicinsk adgang **(foto 9)**.
- Disse paneler kan åbnes for direkte adgang til klienten/patienten uden at hele systemet skal demonteres.
- Åbningerne kan sikres med klikspænder **(foto 10)**.
- Hjerte-Lungeredning (HLR). Et visuelt mærke på det pågældende panel angiver, at dette panel hurtigt kan åbnes for at give øjeblikkelig adgang til genoplivning i nødsituationer **(foto 11)**.
- Ved hjælp til klienten/patienten i nødsituationer: Løsn hurtig-lukningerne for at lyne panelerne helt op.

For plejepersonale i professionelle institutioner skal brugen af CloudCuddle Maxx indarbejdes i organisationens eksisterende nødplan eller kriseprotokol.



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11

2.7.7 Generelle sikkerhedsbetingelser

- Kontroller, at produktet ikke har skader eller defekter på ramme, overtræk, lynlåse eller andre komponenter.
- Ved tvivl mht. skader: Brug ikke CloudCuddle Maxx og kontakt straks leverandøren eller producenten.
- Ved brug på en højdejusterbar seng: Lås højdejusteringsmekanismen og brug kun CloudCuddle Maxx i den laveste position, undtagen under pleje.
- Lad aldrig en klient/patient opholde sig i CloudCuddle Maxx uden overvågning.
- Vær opmærksom på, at kameraovervågning udefra kan besværliggøres af nettet. Det er ikke muligt at montere et kamera indvendig i CloudCuddle Maxx.
- Hold kæledyr væk fra CloudCuddle Maxx for at undgå skader.
- Brug **ALDRIG** et hjælpemiddel, såsom lukkestrimmel eller hængelås, til at lukke panelernes lynlåse.
- Produktet er kun beregnet til brug, som beskrevet i brugsanvisningen. Brug sammen med andre produkter, hjælpemidler eller tilbehør er ikke tilladt, medmindre disse eksplicit er nævnt i brugsanvisningen. Brug af CloudCuddle Maxx sammen med ikke-godkendte produkter kan medføre sikkerhedsrisici. Fabrikanten har udelukkende valideret sikkerheden og ydeevnen for de kombinationer og anvendelser, der er angivet i brugsanvisningen. Enhver anden form for kombineret brug falder uden for fabrikantens godkendelse og er ikke tilladt.

2.8 Under brugen af CloudCuddle Maxx

Det er af stor vigtighed, at CloudCuddle Maxx bruges på en ansvarlig måde, tilpasset den enkelte klients/patientens aktuelle tilstand og behov. Tag højde for følgende retningslinjer under brug:

- [Gennemgå listen over "Vigtige kontrolpunkter" før hver brug \(se side 22\)](#), og før den enkelte klient/patient efterlades uden direkte opsyn.
- [Observer den enkelte klient/patient omhyggeligt](#)
Kontroller, at CloudCuddle Maxx på det pågældende tidspunkt opfylder klientens/patientens fysiske og emotionelle behov. Vær opmærksom på komfort, holdning og adfærd.
- [Vurder brug ved ændringer i tilstanden](#)
Genvurder brugen af CloudCuddle Maxx, hvis den enkelte klients/patientens mentale, fysiske eller adfærdsmæssige tilstand ændrer sig.
- [Stop ved tegn på klaustrofobi](#)
Hvis den enkelte klient/patient lider af klaustrofobi eller bliver klaustrofobisk under brug, skal klienten/patienten omgående fjernes fra CloudCuddle Maxx.
- [Stop brug ved fare](#)
Fjern straks den enkelte klient/patient fra CloudCuddle Maxx, hvis der er tale om:
 - Risiko for selvskade eller skade på andre.
 - Tegn på panik, aggression eller ekstrem uro.
 - Sengen vælter eller er ved at vælte.



Brugen af CloudCuddle Maxx kræver løbende observation og omhyggelig professionel vurdering. Ved tvivl: Konsulter en læge eller ansvarlig plejemedarbejder.

2.9 Hændelser og feedback

For at sikre sikkerheden og kvaliteten af CloudCuddle Maxx bedes du om at tage følgende i betragtning:

Rapportering af hændelser, skader eller defekter

Rapporter straks enhver sikkerhedshændelse, skade eller defekt til:

Human Protection B.V.
Droogdokkeneiland 4
5026 SR Tilburg, The Netherlands
info@cloudcuddle.com
+31 (0)13 303 30 30

Brug ikke CloudCuddle Maxx hvis

- Der er synlige skader på den oppustelige ramme (såsom lækage, revner eller ufuldstændigt oppustede rør).
- Lynlåse ikke fungerer korrekt.
- Der er tegn på slitage eller skader på overtræk eller net.
- Der er tvivl om produktets sikkerhed.

Stop med at bruge produktet i disse tilfælde og kontakt os omgående.

Feedback og brugererfaringer

Din feedback hjælper os med at forbedre CloudCuddle Maxx. Hvis du har kommentarer, forslag eller ønsker at dele dine erfaringer, bedes du kontakte os via: www.cloudcuddle.com.

III. KOMPONENTDELE AF CLOUDCUDDLE MAXX



CloudCuddle Maxx består af følgende komponentdele:

1. Indersnor (valgfrit fra tilgængelighedssæt)
2. Klikspænder/Tilgængelighedssæt (4 x hanstik + 4 x hunstik, valgfrit tilbehør fra tilgængelighedssættet)
3. Betræk
4. Ramme
5. 4 hvide surringsbånd med bæltespænde
6. Inderlynlagen
7. Ventilhætte med lukkelåg
8. 2 hvide stabiliseringsbånd
9. 3 medicinske gennemføringsåbninger
10. HLR (Hjerte-lunge-redning)+ 2x quick Release
11. Gaze
12. 4 adgangspaneler (12a for- og bagside, 12b hoved- og fodende)
13. 3 rørklemmer
14. 3 trykknapperne
15. 4 sorte surringsbånd
16. 4 hvide surringsbånd med klikspænder



3.1 Overtræk

Overtrækket beskytter rammen og giver begrænset udsyn og luftcirkulation via transparent net og medicinsk adgang via særlige åbninger **(foto 12)**.

Egenskaber

- Transparent net.
- 3 medicinske gennemføringsåbninger.
- Fastgørelsespunkter til Quick Release-systemet.
- Kan åbnes på fire sider, ekstra åbninger med lynlås ved hoved- og fodende for intensiv pleje eller nødsituationer.

Material sammensætning

- Blåt overtræk: 100 % polyamid (PA).
- Net: 100 % polyester (PES).
- Hvide sokker: 100 % polyester (PES).
- Vægt: 6.6 kg (ekskl. ramme, inkl. lagen).

3.2 Oppustelig ramme

En stærk, letvægtsramme med flere luftkamre, specielt udviklet for stabilitet og beskyttelse **(foto 13)**.

- Luftkamrene er forbundet med hinanden via luftslanger.
- Efter oppumpning skal luftforbindelserne lukkes med 3 rørklemmerne.
- Vægt: 1.9 kg

3.3 Lagen

Et standard medfølgende lagen, der fastgøres med lynlås. Lagnet kan udskiftes med et andet CloudCuddle Maxx-lagen **(foto 14)**.

- Mål: 196 x 86 cm (L x B).
- Sammensætning: 100 % organisk bomuld (ORGCO).
- Vægt: 0.4 kg



Foto 12



Foto 13



Foto 14

3.4 Pumpe

Håndpumpe, udelukkende beregnet til at pumpe CloudCuddle Maxx-rammen op **(foto 15)**.

- Vægt: 1.1 kg

3.5 Taske

En robust taske til sikker transport og opbevaring af CloudCuddle Maxx **(foto 16)**.

- Materiale: 65 % polyester (PES), 35 % bomuld (CO).
- Vægt: 0.5 kg

3.6 Adgangssæt

Sæt for tilpasset adgang og sikkerhed (foto 17).

- 4 klikspænder til at fastgøre lynlåse på venstre og højre panel.
- Ved hjælp af klikspænder monteres lukkeringene på den dertil beregnede fastgørelsesløkke. Skub de to sider af klikspændet sammen for at låse det. Der høres et klik, når spændet låses. Træk altid i klikspændet, efter det er lukket, for at kontrollere, om det er korrekt låst. Klikspændet fungerer som ekstra sikkerhed ved at forhindre klienten/ patienten i selv at åbne CloudCuddle Maxx.
- En indvendig snor til åbning/lukning, når spænderne ikke bruges.



Foto 15



Foto 16



Foto 17

3.7 Stabilitetsstropser

CloudCuddle Maxx er udstyret med spændestropser på overtrækkets 4 hvide sokker.

De nederste spændestropser inklusive spændeanordninger bruges til fastgørelse til sengerammen.

Øverste på de 4 hvide sokker er der ekstra spændestropser med stropspænder. Disse kan fastgøres separat til hoved- og fodenden af sengen for yderligere sikring.

Hvis fastgørelse i hjørnerne af hoved- og fodenden ikke er muligt, kan stabilitetsstroppeerne bruges.

3.8 Topmadrasser

CloudCuddle Maxx kan bruges med en topmadras. Brugen af ekstra materialer i CloudCuddle Maxx kan dog øge risikoen for forskydning, klemning eller hæmning af åndedrætsfunktionen. Vurder altid omhyggeligt, om brugen af en topmadras er passende og sikker for den indliggende.

Konsulter altid plejeplanen før brug, og vurder om den indliggende både fysisk og kognitivt er i stand til at flytte sig eller skubbe topmadrasen væk i en nødsituation. Som rettesnor gælder, at topmadrasen maksimalt må veje 10 % af den indliggendes kropsvægt.

Derudover skal der tages højde for, at nogle topmadrasser har et aftageligt betræk med lynlås, som kan åbnes af den indliggende. Det kan øge risikoen for klemning eller hæmning af åndedrætsfunktionen. Endvidere giver det den indliggende adgang til indholdet i topmadrasen.

En topmadras ligger ikke fastgjort i CloudCuddle Maxx. Det betyder, at topmadrasen kan forskyde sig, især hos personer med urolig natlig adfærd eller som ligger langvarig vågen. Hos disse grupper er der øget risiko for, at den indliggende ender under topmadrasen. Det er nødvendigt med aktiv overvågning for at fastslå, om brugen af topmadrasen fortsat er sikker.

Kontroller dagligt at:

- Topmadrasen er i god stand.
- Lynlås på topmadrasen er lukkede.
- Topmadrasen er korrekt placeret og ikke har flyttet sig.
- Topmadrasen stadig imødekommer den indliggendes aktuelle tilstand og ikke fører risici med sig.

Topmadrasen kan til enhver tid fjernes. CloudCuddle Maxx kan altid bruges uden en topmadras.

3.8.1 Tekniske specifikationer

En topmadras, som bruges i CloudCuddle Maxx, skal mindst overholde følgende krav:

- Topmadrassen har en fast kerne, ikke baseret på luft (som luftmadrasser eller dynamiske trykafastende systemer).
- Mål: 200 x 90 x 2,5 - 5 cm (L x B x H).
- Topmadrassen må ikke have skarpe eller hårde kanter, der kan beskadige overtrækket eller nettet på CloudCuddle Maxx.

ADVARSEL

Brug ikke topmadrasser, indlægs Madrasser, måtter eller andre materialer, der ikke opfylder ovenstående specifikationer. Det kan føre til ustabilitet, forskydning, klemning eller hæmning af åndedrætsfunktionen, og udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko.

4.1 Mål

- Outer dimensions: 200 x 126 x 110-120 cm (L x B x H).
- Inner dimensions: 200 x 90 x 90-100 cm (L x B x H).
- Indvendig højdet: 90 cm

4.1.1 Vægt

- Samlet vægt på CloudCuddle Maxx: 11 kg

4.1.2 Maksimal belastning

- Maksimal brugervægt: 100 kg
- Maksimal brugerhøjde: 193 cm



Foto 18

Foto 19

4.2 Reservedele

Mangler der en komponentdel eller er komponentdele slidte og skal udskiftes (f.eks. klikspænder, ventilhætter, overtræk eller taske)? Private brugere kan bestille reservedele i vores webshop: www.cloudcuddle.com.

Professionelt plejepersonale kan bestille reservedele via Human Protection. Tag kontakt via den sædvanlige kanal eller info@humanprotection.nl.

Artikelkode	Beskrivelse
CCM01.01	CloudCuddle Maxx Betræk
CCM01.02	CloudCuddle Maxx Ramme
CCM01.03	CloudCuddle Maxx Lagen
CCM01.04	CloudCuddle Maxx Pumpe

CCM01.05	CloudCuddle Maxx Taske
CCM01.06	Cloudcuddle Maxx Tilgængelighedssæt (quick release system Indersnor)
CCM01.08	CloudCuddle Maxx hvide stabiliseringsbånd
CCVEN	CloudCuddle Maxx ventilhætte ramme rød
CCSLA	CloudCuddle Maxx reparationssæt små slanger ramme



5.1 Producent- og repræsentantoplysninger

	<p>Human Protection B.V. Droogdokkeneiland 4 5026 SR Tilburg, Netherlands www.humanprotection.nl info@humanprotection.nl</p>	<p>UK Responsible person: UKCA Expert Ltd 6th Fl. City Gate East, Toll House Hill, Nottingham, NG1 5FS, UK</p>	<p>CH Responsible Person: Certification Experts Sàrl Avenue de Gratta-Paille 1018 Lausanne Switzerland</p>
--	---	---	---

5.2 Mærkater pr. komponentdel

<p>CloudCuddle Maxx cover CloudCuddle Maxx hoese CloudCuddle Maxx cover CloudCuddle Maxx abdeckung Couverture CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxxparash</p> <p>CloudCuddle Maxx overtræk Funtel CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx træk Cape CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx-hoesel</p> <p>REF CCM01.01 2025-01-01</p> <p>LOT 0000</p> <p>Cover:100% PA Mesh:100% PES Soek:100% PES</p> <p>SN 06000000</p> <p>Human Protection B.V. Droogdokkeneiland 4 5026 SR Tilburg, The Netherlands www.humanprotection.nl info@humanprotection.nl</p> <p>UK Responsible Person UKCA Expert Ltd 6th Fl. City Gate East Toll House Hill Nottingham, NG1 5FS, UK</p> <p>Certification Experts Sàrl Avenue de Gratta-Paille 2 1018 Lausanne Switzerland</p>	<p>CloudCuddle Maxx frame CloudCuddle Maxx frame CloudCuddle Maxx frame CloudCuddle Maxx rahmen Cadre CloudCuddle Maxx</p> <p>Strutura CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx ramiere Estrutura CloudCuddle Maxx Ramme CloudCuddle Maxx Estrutura CloudCuddle Maxx</p> <p>REF CCM01.02 2025-01-01</p> <p>LOT 0000</p> <p>Weight: 100kg</p> <p>SN 06100000</p> <p>Human Protection B.V. Droogdokkeneiland 4 5026 SR Tilburg, The Netherlands www.humanprotection.nl info@humanprotection.nl</p> <p>UK Responsible Person UKCA Expert Ltd 6th Fl. City Gate East Toll House Hill Nottingham, NG1 5FS, UK</p> <p>Certification Experts Sàrl Avenue de Gratta-Paille 2 1018 Lausanne Switzerland</p>	<p>CloudCuddle Maxx sheet CloudCuddle Maxx sheet CloudCuddle Maxx sheet CloudCuddle Maxx sheet Drap CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx takan</p> <p>Laportel CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx lapier Sàlvaria de CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx saafel Lenpoli de CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx parati</p> <p>REF CCM01.03 2025-01-01</p> <p>LOT 0000</p> <p>Sheet: 100% ORGCO</p> <p>SN 06200000</p> <p>Human Protection B.V. Droogdokkeneiland 4 5026 SR Tilburg, The Netherlands www.humanprotection.nl info@humanprotection.nl</p> <p>UK Responsible Person UKCA Expert Ltd 6th Fl. City Gate East Toll House Hill Nottingham, NG1 5FS, UK</p> <p>Certification Experts Sàrl Avenue de Gratta-Paille 2 1018 Lausanne Switzerland</p>
<p>CloudCuddle Maxx pump CloudCuddle Maxx pomp CloudCuddle Maxx pompe CloudCuddle Maxx pompe CloudCuddle Maxx pompe</p> <p>Pompa CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx-pompje Bomba CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx-pompe CloudCuddle Maxx-pompe</p> <p>REF CCM01.04 2025-01-01</p> <p>LOT 0000</p> <p>SN 06300000</p> <p>Human Protection B.V. Droogdokkeneiland 4 5026 SR Tilburg, The Netherlands www.humanprotection.nl info@humanprotection.nl</p> <p>UK Responsible Person UKCA Expert Ltd 6th Fl. City Gate East Toll House Hill Nottingham, NG1 5FS, UK</p> <p>Certification Experts Sàrl Avenue de Gratta-Paille 2 1018 Lausanne Switzerland</p>	<p>CloudCuddle Maxx bag CloudCuddle Maxx tas CloudCuddle Maxx tas CloudCuddle Maxx tasche Sac CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx vaska</p> <p>Borsa CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx taske Borsa CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx vaska Borsa CloudCuddle Maxx CloudCuddle Maxx vaska</p> <p>REF CCM01.05 2025-01-01</p> <p>LOT 0000</p> <p>Bag: 65% PES, 35% CO</p> <p>SN 06400000</p> <p>Human Protection B.V. Droogdokkeneiland 4 5026 SR Tilburg, The Netherlands www.humanprotection.nl info@humanprotection.nl</p> <p>UK Responsible Person UKCA Expert Ltd 6th Fl. City Gate East Toll House Hill Nottingham, NG1 5FS, UK</p> <p>Certification Experts Sàrl Avenue de Gratta-Paille 2 1018 Lausanne Switzerland</p>	











5.3 QR-kode

QR-kode på CloudCuddle Maxx er placeret på hovedenden af produktet og sidder midt på ydersiden af overtrækket. Denne QR-kode bruges til at hente den digitale brugsanvisning og instruktionsvideoerne online (**foto 14**).



Foto 14

5.4 Symbolforklaring

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Advarsel		Medicinsk udstyr
	Producent		Se brugsanvisningen inden brug
	Produktionsland		Skal holdes tør
	Katalognummer		Holdes væk fra sollys og varmekilder
	Serienummer		Batchnummer

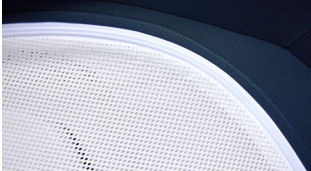



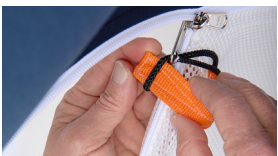

6.1 Opsætning

CloudCuddle Maxx kan nemt opsættes ved at følge nedenstående instruktioner.

Trin	Instruktion	Foto
1	Åbn tasken og tag CloudCuddle Maxx ud.	 <p>Foto 15</p>
2	Læg CloudCuddle Maxx på madrassen.	 <p>Foto 16</p>
3	Rul CloudCuddle Maxx helt ud over madrassen.	 <p>Foto 17</p>
4	Fold CloudCuddle Maxx helt ud.	 <p>Foto 18</p>
5	Fastgør madrasovertrækket, inklusive lagnet, som lynes fast omkring madrassen. Sørg for, at hjørner sidder korrekt omkring madrassen.	 <p>Foto 19</p>
6	Vip madrassen op, og fastgør de fire spændebånd under madrassen ved at lukke spænderne.	 <p>Foto 20</p>
7	Stram båndene ved at trække i de løse ender.	 <p>Foto 21</p>

Trin	Instruktion	Foto
8	Kontroller, at alle fire bånd er korrekt fastgjorte.	 <p>Foto 22</p>
9	Vip madrassen tilbage på sengerammen.	 <p>Foto 23</p>
10	Kontroller, at rørklemmerne øverst på CloudCuddle Maxx er åbne.	 <p>Foto 24</p>
11	Indstil den medfølgende pumpe til stand 1.	 <p>Foto 25</p>
12	Åbn ventilhætten, og stram den bagerste takkede ring for at lukke ventilen tæt. Sørg for, at snoren ligger frit og kontroller, at der ikke høres hvislende lyd.	 <p>Foto 26</p>
13	Tilslut den medfølgende slange til pumpen, og drej den på plads i låseanordningen.	 <p>Foto 27</p>
14	Tilslut den anden ende af slangen til CloudCuddle Maxx, og lås den fast.	 <p>Foto 28</p>
15	Pump CloudCuddle Maxx op. Udfør 70 fulde pumpbevægelser.	 <p>Foto 29</p>

Trin	Instruktion	Foto
16	<p>Kontroller, at CloudCuddle Maxx er fuldt oppustet. Det er tilfældet, når du ikke længere kan trykke rammen ind. Kontroller, at CloudCuddle Maxx er fuldt oppustet ved at kontrollere følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rammen føles stabil og formfast - rammen kan ikke trykkes ind med hånden - nettet er synligt spændt og hænger ikke slapt. 	 <p>Foto 30</p>
17	<p>Luk ventilhætten korrekt, og sæt den medfølgende beskyttelseshætte over ventilen. Kontroller igen, at snoren ligger frit og ikke sidder i klemme for at forhindre, at rammen mister luft.</p>	 <p>Foto 31</p>
18	<p>Luk 3 rørklemmerne øverst på CloudCuddle Maxx for at lukke luftforbindelsen mellem rørene.</p>	 <p>Foto 32</p>
19	<p>Luk overtrækket omkring rørene med lynlås, og luk 3 trykknapperne oven på overtrækket.</p>	 <p>Foto 33</p>
20A	<p>Fastgør CloudCuddle Maxx ved at føre spændebåndene i hjørnerne omkring benene på sengerammen, klik spænderne godt i, og træk spændebåndene stramme.</p> <p>Hvis det er muligt, skal CloudCuddle Maxx yderligere sikres til sengens hoved- og/eller fodenden ved hjælp af de ekstra spændebånd. Luk spænderne og træk spændebåndene stramme.</p>	 <p>Foto 34</p>
20B	<p>BEMÆRK! Hvis CloudCuddle Maxx placeres på en højdejusterbar seng, skal spændebåndene altid fastgøres på den bevægelige del af understellet. Luk spænderne og træk spændebåndene stramme. Sæt den højdejusterbare seng i den laveste position (undtagen under pleje), og aktiver låsefunktionen. Aktiver derefter sengens brems.</p>	 <p>Foto 35</p>
21	<p>Kontroller, at de 3 medicinske gennemføringsåbninger er lukkede, og at lynlåsstrækkeren ligger fladt mod lynlåsen, således lynlåsen låses.</p>	 <p>Foto 36</p>

Trin	Instruktion	Foto
22	<p>Kontroller under lukning af lynlåse på CloudCuddle Maxx, at de alle glider let og uden modstand.</p> <p>Brug ikke CloudCuddle Maxx, hvis en eller flere lynlåse ikke kan lukkes korrekt eller er svære at lukke. I så fald skal du kontakte os.</p>	 <p>Foto 37</p>
23	<p>Adgangssæt med indvendig snor for ekstra bevægelsesfrihed.</p> <p>Træk den sorte snor gennem hullet på lynlåstrækkeren. Træk efterfølgende den orange lynlåstrækker på den indvendige side af CloudCuddle Maxx.</p> <p>Kontroller, at den indvendige snor er korrekt monteret, og at CloudCuddle Maxx kan åbnes indefra med snoren.</p> <p>Fjernelse af den indvendige snor betragtes som en frihedsbegrænsende foranstaltning og må kun gøres under ansvar af en medicinsk fagperson.</p>	 <p>Foto 38</p>  <p>Foto 39</p>
24	<p>Adgangssæt ekstra sikkerhed Quick Release-system Fastgør nøgleringene til CloudCuddle Maxx.</p>	 <p>Foto 40</p>  <p>Foto 41</p>
25	<p>Når lynlåsen er lukket og klikspænderne efterfølgende ikke lukkes, kan CloudCuddle Maxx åbnes indefra med den indvendige snor. Når klikspænderne er lukkede, kan CloudCuddle Maxx ikke længere åbnes indefra heller ikke med den indvendige snor. Lukning af klikspænderne betragtes som en frihedsbegrænsende foranstaltning og må kun gøres under ansvar af en medicinsk fagperson.</p>	 <p>Foto 42</p>

6.1.1 Tjekpunkter efter opsætning

Efter opsætning skal følgende kontrolpunkter udføres:

- Spændebåndene er korrekt fastgjorte:
 - Under madrassen.
 - Omkring sengeben og sengeramme.
 - Ved højdejusterbar seng: Spændebåndene er fastgjorte til den bevægelige del af rammen.
- Rammen på CloudCuddle Maxx er hårdt oppustet og kan ikke trykkes ind med hånden.
- CloudCuddle Maxx er placeret væk fra vægge og andre forhindringer.
- CloudCuddle Maxx har nok plads omkring sig til at kunne opnå sin fulde udvendige størrelse. De udvendige mål på CloudCuddle Maxx er:
 - 200 x 126 x 110-120 cm (L x B x H), hvor højden måles fra toppen af madrassen til toppen af rammen på CloudCuddle Maxx.
- CloudCuddle Maxx er ikke klemt mod sengeheste.
- CloudCuddle Maxx er placeret på en madras på 200 x 90 x 12-26 cm (L x B x H).
- CloudCuddle Maxx er placeret på en sengeramme og madras med en samlet vægt på mindst 66 kg.
- Lagen og net er stramt spændte uden synlige folder.
- 3 Rørklemmerne øverst på CloudCuddle Maxx-rammen er lukkede.
- 3 Trykknapperne oven på er korrekt lukkede.
- Ved højdejusterbar seng. Korrekt fastgjort til den bevægelige ramme.


- Ved højdejusterbar seng. Sengen skal brug i den laveste position (max 50 cm), undtagen under pleje.
- Låsefunktionen på sengerammen er aktiveret.
- Sengens bremses er korrekt aktiveret.
- Ingen synlige defekter på ramme, overtræk eller andre komponentdele.
- Alle lynlåstrækkere er korrekt placeret og låste.
- De 3 medicinske gennemføringsåbninger er lukkede, medmindre åbninger bruges til medicinske slanger.
- Ritstrækkerne på de medicinske gennemføringsåbninger ligger fladt og er dermed sikret.
- Hvis den indvendige snor skal kunne bruges, skal Quick Release-systemet ikke bruges.
- Kontroller, om ventilen er korrekt lukket:
 - Den bageste takkede ring skal være stramt skruet fast.
 - Den røde ventilhætte skal være korrekt og stramt skruet fast.
 - Der må ikke høres hvislende lyd fra lækkende luft. Ellers kan det medføre, at rammen langsomt tømmes for luft, hvilket påvirker klientens/patientens sikkerhed.
 - Ventilen er fastgjort til en snor for at forhindre, at den mistes.
 - Vær opmærksom på, at ventilsnoren ikke bliver klemt, når den bageste takkede ring strammes, da det kan føre til, at luft slipper ud.
- Der må ikke være anbragt løse genstande eller løse materialer i CloudCuddle Maxx. Dette kan påvirke udstyrets funktionalitet.

For den daglige inspektion af CloudCuddle Maxx henviser vi til dokumentet "CloudCuddle Maxx Inspektionspunkter".

6.2 Nedtagning

CloudCuddle Maxx kan nemt nedtages ved at følge nedenstående instruktioner.

Trin	Instruktion	Foto
1	Åbn 3 trykknapperne oven på overtrækket.	 Foto 43
2	Åbn de 3 rørklemmer, så luftforbindelsen aktiveres.	 Foto 44
3	Skrue den bageste takkede ring løs for at åbne ventilen og tømme CloudCuddle Maxx for luft. Vær forsigtig, idet luften kan sendes ud med et kraftigt smæld.	 Foto 45
4	Løsn spændebåndene fra sengerammen ved at åbne spænderne.	 Foto 46

Trin	Instruktion	Foto
5	Vip madrassen op og løs de fire spændebånd under madrassen ved at åbne spænderne.	 <p>Foto 47</p>
6	Læg CloudCuddle Maxx tilbage på sengerammen og placer den oppustelige ramme midt på madrassen.	 <p>Foto 48</p>
7	Fjern CloudCuddle Maxx fra madrassen ved at løsne hjørnerne og folde dem indad. Læg alle dele såsom spændebånd, spænder og rør ind i madrassens overtræk. Arbejd fra yderkanten mod midten.	 <p>Foto 49</p>
8	Til sidst rulles CloudCuddle Maxx sammen. Rul altid i retning af ventilen, så der presses så meget luft ud af rammen som muligt.	 <p>Foto 50</p>
9	Fold CloudCuddle Maxx sammen og læg den i tasken. Læg derefter pumpen i tasken sammen med CloudCuddle Maxx.	 <p>Foto 51</p>

7.1 Vaskeanvisninger

CloudCuddle Maxx kan bruges i hjemmet såvel som på sygehuse eller i plejehjem.

Måden at rengøre, desinficere og vedligeholde på afhænger af brugsmiljøet. Overholdelse af disse vaskeanvisninger bidrager til at opretholde CloudCuddle Maxx's levetid, hygiejne, kvalitet og sikkerhed.

7.1.1 Sygehuse og plejehjem

- Komplet rengøring og desinfektion skal altid udføres af Human Protection B.V., eller en servicepartner udpeget af Human Protection.
- Brugere og plejepersonale må ikke rengøre eller desinficere de indvendige dele.

7.1.2 Ved brug i private hjem

- I hjemmet må brugeren rengøre og vedligeholde CloudCuddle Maxx i henhold til instruktionerne i **kapitel 7.3**.
- Der gælder specifikke retningslinjer for vask af overtrækket, rengøring af den oppustelige ramme samt kontrol af delene for snavs.

7.2 Rengøring, desinfektion og vedligeholdelse for sygehuse og plejehjem

- Efter hver brugsperiode skal CloudCuddle Maxx rengøres, desinficeres og inspiceres professionelt af Human Protection B.V., eller en servicepartner udpeget af Human Protection.
- Denne procedure omfatter:
 - Rengøring og desinfektion af overtræk, lagen og fastgørelseselementer.
 - Rengøring og desinfektion af den oppustelige ramme.
 - Kontrol af den generelle produkttilstand.
 - Frigivelse til videre brug.

Produktet frigives først, når alle proceduretrin er afsluttet, og det har gennemgået den fulde kvalitetskontrol med et positivt resultat.

7.2.1 Udskiftningsinterval ved langvarig brug

- CloudCuddle Maxx kan bruges i længere tid til den samme indliggende person.
- For alle langvarige brugsituationer gælder et fast udskiftningsinterval på 60 dage.
- Efter hver brugsperiode på 60 dage skal CloudCuddle Maxx rengøres, desinficeres og inspiceres professionelt af Human Protection B.V., eller en servicepartner udpeget af Human Protection.

7.2.2 Overfladerengøring ved løbende brug

Når CloudCuddle Maxx bruges i længere tid af samme indliggende person, kan overfladerengøring udføres af plejepersonalet:

- Rengør ydersiden af overtrækket med en blød, let fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel (pH 6–8).
- Brug ikke klorholdige, alkohol-, skure- eller ætsende midler til rengøring, der udføres i mellemtiden.
- Sørg for, at overtrækket er helt tørt, før udstyret tages i brug igen.
 - Ved kraftig forurening skal Human Protection altid kontaktes for professionel rengøring, desinfektion og kontrol.

7.2.3 Vedligeholdelse og kontrol

Vedligeholdelse og funktionskontrol må udelukkende udføres af Human Protection B.V., eller en servicepartner udpeget af Human Protection.

Ved synlig skade, lækage eller defekter må CloudCuddle Maxx ikke bruges. Dette skal omgående rapporteres til Human Protection B.V.

Al vedligeholdelse og rengøring samt alle udskiftningsintervaller registreres i service- og vedligeholdelsessystemet hos Human Protection B.V.

7.2.4 Videre brug

CloudCuddle Maxx er egnet til videre brug af andre indliggende forudsat, at udstyret for hver indliggende person bliver fuldstændigt rengjort, desinficeret og godkendt af Human Protection B.V., eller en servicepartner udpeget af Human Protection. Videre brug må ude-

lukkende finde sted efter professionel behandling og inspektion, og aldrig omgående på institutioner og sygehuse.

7.2.5 Brug i professionelt plejemiljø

Når CloudCuddle Maxx bruges i professionelle plejemiljøer, skal brugen finde sted i henhold til protokoller, retningslinjer og ansvarsområder gældende for den pågældende professionelle fagperson eller plejehæder.

Beslutningen om brug og måden, udstyret bruges på (f.eks. i situationer med intensiv pleje eller mulig frihedsbegrænsning), falder under den professionelle fagpersoners eller institutionens ansvar.

Human Protection B.V. leverer udelukkende brugsanvisningen og de tekniske instruktioner. Klinisk vurdering, indikation og faktisk brug ligger uden for fabrikantens ansvar.

7.3 Rengøring ved hjemmebrug

CloudCuddle Maxx er egnet til brug i hjemmet og kan nemt rengøres. Hver af de enkelte komponenter, lagenet, overtrækket og den op-pustelige ramme, har en særlig rengøringsprocedure. Følg de nedenstående vaskeanvisninger omhyggeligt for at sikre hygiejne, kvalitet og sikkerhed under brug i hjemmet.

- Lagnet kan lynes af og vaskes separat.
- Den oppustelige ramme må ikke vaskes i vaskemaskine (se afsnit 7.5.1).
- Både lagen og overtræk kan vaskes ved 60 grader.
- Luk altid alle lynlåse og spænder før vask i vaskemaskine.
- Vask altid tasken separat fra lagen og overtræk for at undgå farveafsmitning.
- **BEMÆRK!** CloudCuddle Maxx passer i en vaskemaskine med en tromle med en kapacitet på 10 kg.

7.4 Vask af lagen

Lagnet kan vaskes i henhold til anvisningerne på vaskeetiketten. Lagnet skal lynes af, inden det vaskes.

Når du lynet lagnet af eller på behøver du ikke at tømme CloudCuddle Maxx for luft eller fjerne madrassen helt.

Da det er særdeles vigtigt for sikkerheden at alle stoffer på CloudCuddle Maxx er stramt udspændte, kan der være brug for ekstra spillerum, når lagnet lynes af og på. Det kan derfor være nødvendigt at løsne spænderne fra sengerammen og skubbe hjørnerne midlertidigt af madrassen.


Når lagnet lynes på, er det vigtigt, at overtrækket igen trækkes ned over hjørnerne og at spænderne fastgøres korrekt til sengerammen.

7.4.1 Lyne lagnet af

Trin	Instruktion	Foto
1	Løsn spænderne fra sengerammen og fjern overtrækket fra hjørnerne af madrassen. Det reducerer spændingen på materialet, så lynlåsen er nemmere at åbne.	 <p>Foto 52</p>
2	Stik hånden gennem åbningen ved siden af ventilen og lyn lagnet en smule åbent.	 <p>Foto 53</p>

Trin	Instruktion	Foto
3	Træk lynlåstrækkeren opad fra lynlåsskyderen, så lagnet kan lynes af indvendig fra CloudCuddle Maxx.	 <p>Foto 54</p>
4	Lyn derefter lagnet helt af CloudCuddle Maxx og fjern det.	 <p>Foto 55</p>
5	BEMÆRK! CloudCuddle Maxx må kun bruges med et CloudCuddle Maxx-lagen. Brug er ikke tilladt, hvis lagnet ikke er lynet på.	



7.4.2 Lyne lagnet på

Trin	Instruktion	Foto
1	Åbn spænderne på spændebåndene i hjørnerne af sengerammen og træk overtrækkets hjørner af madrassen.	 <p>Foto 56</p>
2	Sørg for, at lynlåsskyderen og lynlåstrækkeren på overtrækket er ved lynlåstopperen (enden af lynlåsen).	 <p>Foto 57</p>
3	Skub lynlåsen på overtrækket ind i lynlåsskyderen på lagnet og lyn lagnet helt fast på overtrækket.	 <p>Foto 58</p>
4	Tryk lynlåstrækkeren på lynlåsskyderen ned, så den låses.	 <p>Foto 59</p>

Trin	Instruktion	Foto
5	Stik hånden gennem åbningen ved siden af ventilen og luk lynlåse helt.	 Foto 60
6	Anbring overtrækket rundt om madrassen og fastgør alle spændebåndene til madrassen og sengerammens ben.	 Foto 61
7	Udfør efterfølgende kontrol i henhold til opsætningsproceduren og kontrolpunkterne (kapitel 6), efter opsætning).	

7.5 Vask af overtræk

For at kunne vaske overtrækket, skal overtrækket fjernes fra den oppustelige ramme. **BEMÆRK!** Den oppustelige ramme må ikke vaskes i vaskemaskine. Overtrækket, inklusive to lagner, kan vaskes i vaskemaskinen. På grund af volumen er det vigtigt på forhånd at kontrollere, om vaskemaskinen er egnet. I de fleste tilfælde er en vaskemaskine med en tromlekapacitet på 10 kg nødvendig.

Trin	Instruktion	Foto
1	Åbn 3 trykknapperne oven på overtrækket.	 Foto 62
2	Åbn de 3 rørklemmer, så luftforbindelsen aktiveres.	 Foto 63
3	Luk alle lynlåse korrekt.	 Foto 64
4	Skru den bageste takkede ring løs for at åbne ventilen og tømme CloudCuddle Maxx for luft. Vær forsigtig, idet luften kan sendes ud med et kraftigt smæld.	 Foto 65






Trin	Instruktion	Foto
5	Læg CloudCuddle Maxx tilbage på sengerammen og placer den oppustelige ramme midt på madrassen.	 <p>Foto 66</p>
6	Lyn alle ben åbne fra toppen, så den oppustelige ramme eksponeres, og fjern overtrækket fra rammen.	 <p>Foto 67</p>
7	Luk lynlåsene på overtrækkets ben.	 <p>Foto 68</p>
8	Fjern CloudCuddle Maxx fra madrassen ved at løsne hjørnerne og folde dem indad. Læg alle komponentdele såsom spændebånd, spænder og ben ind i madrassens overtræk. Sørg for, at alle lynlåse og spændeordninger er lukkede før vask.	 <p>Foto 69</p>
9	Læg overtrækket i vaskemaskinen. Det anbefales at vaske overtrækket ved lav temperatur. Det er dog muligt at vaske det ved 60 °C. Bemærk: Den oppustelige ramme må ikke vaskes i vaskemaskine!	 <p>Foto 70</p>
10	Læg CloudCuddle Maxx tilbage på sengerammen og placer den oppustelige ramme midt på madrassen.	 <p>Foto 71</p>
11	Lyn alle ben åbne fra toppen, så den oppustelige ramme eksponeres, og fjern overtrækket fra rammen.	 <p>Foto 72</p>
12	Overtrækket må ikke tørres i tørretumbler. Lad overtrækket lufttørre for at bevare kvaliteten. For at forlænge lagnets levetid, anbefaler vi lufttørring i stedet for tørring i tørretumbler.	

7.5.1 Rengøring og desinfektion af den oppustelige ramme

- Rengør den oppustelige ramme med en blød klud let fugtet med lunkent vand.
- For desinfektion kan rammen tørres af med en klud fugtet med maksimalt 70 % alkohol (ethanol eller isopropanol).
- Undgå langvarig kontakt med alkohol eller andre opløsningsmidler for at undgå forhærdning, misfarvning eller beskadigelse af materialet.
- Efter desinfektion skal rammen tørres let af med en ren, fugtig klud for at fjerne eventuelle rester. Efterfølgende skal rammen omhyggeligt tørres af med en blød, tør klud.
- Sænk aldrig rammen ned i vand, og brug ikke rindende vand eller højtryksrensning.
- Brug ikke klorholdige, ammoniak, skure- eller ætsende midler.
- Kontroller før montering, at rammen er helt tør og uden skader.
- Kontroller endvidere, at alle lynlåse på rammen er helt lukkede, før overtrækket monteres, eller udstyret tages i brug.

ADVARSEL! Forkert rengøring eller eksponering for aggressive midler kan føre til materialeskader, lækage eller reduceret udstyrssikkerhed. Følg altid de ovenstående rengøringsanvisninger for at sikre CloudCuddle Maxx's levetid og sikkerhed.

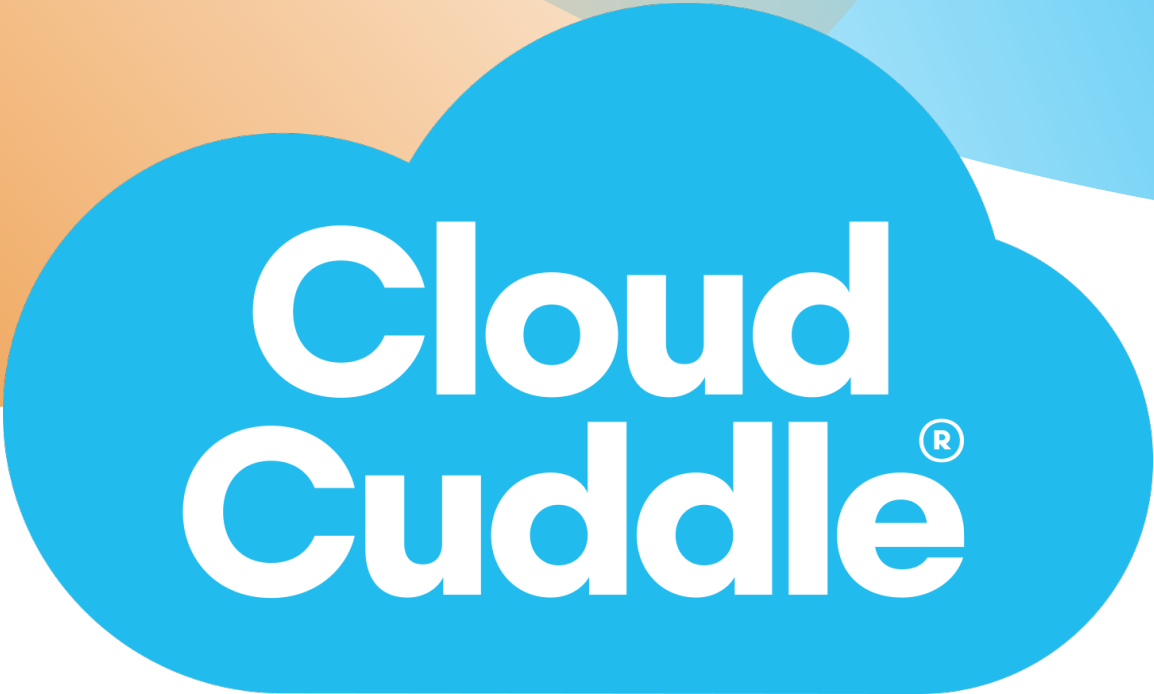
7.5.2 Sæt ramme tilbage

Trin	Instruktion	Foto
1	Læg CloudCuddle Maxx åben på madrassen. Fold overtrækket helt åbent og åbn alle spænder.	  <p>Foto 73</p>
2	Lyn alle ben helt åbne; start fra toppen.	 <p>Foto 74</p>
3	Tag rammens midte, og placer den med slanger og trykknapper vendt opad i midten af det åbenlynedede overtræk. Sørg for, at de fire rør er placeret på de blå ben med sømmene opad.	 <p>Foto 75</p>
4	Fold de 3 trykknapper over rammens midte og luk dem.	 <p>Foto 76</p>

Trin	Instruktion	Foto
5	Anbring først benet med ventilen i den korrekte hvide sok. Skub rammen godt ind i sokken og luk lynlåsen på benet.	 <p data-bbox="922 594 992 622">Foto 77</p>
6	TIP! Pump rammen let op forhånd, så formen bliver synlig. Det forhindrer, at benene vrides rundt.	
7	Om nødvendigt kan der pumpes mere luft i rammen for at få rammen til at sidde godt i sokken.	
8	Når alt er kontrolleret, tømmes rammen for luft og derefter skal du følge instruktionerne for opsætning (kapitel 6) for at sikre, at CloudCuddle Maxx igen kan bruges på den rigtige og sikre måde..	

Brug nedenstående tjekliste til at løse ofte forekommende problemer. Følg instruktionerne omhyggeligt for at sikre korrekt og sikker brug af CloudCuddle Maxx.

1. **Langsom lækage af luft eller en hvislende lyd**
Siver luften langsomt ud af CloudCuddle Maxx eller høres der en hvislende lyd? Kontroller, om den bageste takkede ring på ventilen er strammet korrekt. Sørg for, at snoren, som er forbundet til ventilen, ikke er klemt i ringen. Hverken den takkede ring eller den røde ventilhætte må lække luft. Kontakt os ved vedvarende lufttab.
2. **Rørene fyldes eller tømmes ikke for luft**
Fyldes et af rørene ikke med luft under opsætning eller tømmes det ikke for luft under nedtagning? Kontroller, at rørklemmerne øverst på CloudCuddle Maxx er åbne. Tømmes et rør ikke korrekt, selvom om rørklemmerne er åbne? Rul det pågældende ben mod midten for at presse luften ud. Kontakt os ved vedvarende tryktab.
3. **Det er svært at åbne eller lukke lynlås**
Det kan have flere årsager:
- Der sidder stof eller andre materialer fast i lynlåsen.
Det kan løses ved at trække lynlåsen tilbage. Træk lynlåsskyderen bagud i modsat retning, indtil lynlåsen er fri. Kontroller, om lynlåsen, lynlåsstrækkeren og stoffet på overtrækket stadig er intakt, og om der er tegn på slid eller beskadigelser.
- Kontroller tænderne på lynlåsen for brud eller afbrækkede tænder. Er en tand bøjet eller brækket af? Brug ikke CloudCuddle Maxx og kontakt os.
Går lynlåsen op efter den er lynet?
- Lynlåsens to tandbånd går fra hinanden efter lukning af lynlåsen. Lynlåsskyderen er beskadiget og sammenfletter ikke tænderne korrekt, når lynlåsen lukkes. Kontakt os ved slitage eller skader.
- Undgå dette ved altid kun at åben lynlåsen ved hjælp af lynlåsstrækkeren.
- Træk aldrig adgangspanelet åbent: Det vil beskadige lynlåsstrækkeren, så lynlåsen ikke kan lukkes ordentligt.
4. **Utilsigtet åbning indefra**
Kan CloudCuddle Maxx åbnes indefra via hoved- eller fodenden? Luk klikspænderne på den udvendige side.
Er det muligt at åbne CloudCuddle Maxx indefra via sidepanelerne og bruges klikspænderne (Quick Release-systemet) ikke?
Monter klikspænderne og kontakt os. Det indvendige lag er muligvis beskadiget.
5. **Passer CloudCuddle Maxx ikke i tasken?**
Rul yderligere luft ud af rørene og prøv igen.
6. **Pumpeslangen kommer løs**
Kommer pumpeslangen løs under oppumpning? Drej slangen fast, indtil du hører et klik.
7. **Benene bøjer , når klienten/patienten kommer i kontakt med nettet**
Bøjer benene sig, når klienten/patienten kommer i kontakt med nettet? Pump mere luft i CloudCuddle Maxx. Det er tilstrækkeligt, når benene ikke længere kan trykkes ind. Er problemet ikke løst? Brug ikke CloudCuddle Maxx og kontakt os.
8. **Lynlås eller klikspænde fungerer ikke korrekt**
Er der modstand i en lynlås eller fungerer klikspænde ikke korrekt? Kontakt os.
9. **Skader**
Er noget beskadiget? Kontakt os for råd, reparation eller udskiftning.
10. **En lynlås er sprunget op eller har løsnet sig**
Er en lynlås sprunget op eller har løsnet sig? Kontakt os for reparation.
11. **Rammen passer ikke korrekt, eller benene drejer/bliver deforme, når de sættes tilbage i overtrækket**
Er benene drejede eller er rammen deform? Rammen er sandsynligvis ikke korrekt opsat. Følg instruktionerne i **kapitel 6** i brugsanvisningen for korrekt opsætning af rammen. Vær opmærksom på korrekt position på benene i de hvide sokker.
12. **Benene på CloudCuddle Maxx står skævt eller ustabil**
Stå rammens ben ikke lige eller virker CloudCuddle Maxx ikke til at stå solidt positioneret? Kontroller, at benene ikke er klemt ved hoved- og/eller fodenden på sengen. Sørg for, at alle ben er fri og korrekt positioneret, så rammen står stabilt.

The logo features the text "Cloud Cuddle" in a white, rounded, sans-serif font. The word "Cloud" is positioned above "Cuddle". A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter "e" in "Cuddle". The text is centered within a blue, cloud-like shape that has a soft, irregular outline. The background consists of large, overlapping circles in shades of orange, light blue, and a darker blue, creating a soft, abstract backdrop.

**Cloud
Cuddle[®]**